

Gebruikswijze G-Red

Ca. 5 min per keer / dagelijks mogelijk


- **Ultrasonische massage, voedend, porie verkleinend, verbeterd elasticiteit.**

Stap 1

Druk de aan/uit knop 3 keer kort in tijdens de standby modus of druk nog een keer op de knop vanuit G-blue modus. G-Red LED zal hierna oplichten en de functie zal starten.


Stap 2

Breng cosmetische producten (voedende creme of rimpel verzorgende producten) aan op de huid en gebruik het in de richting volgens afbeelding.

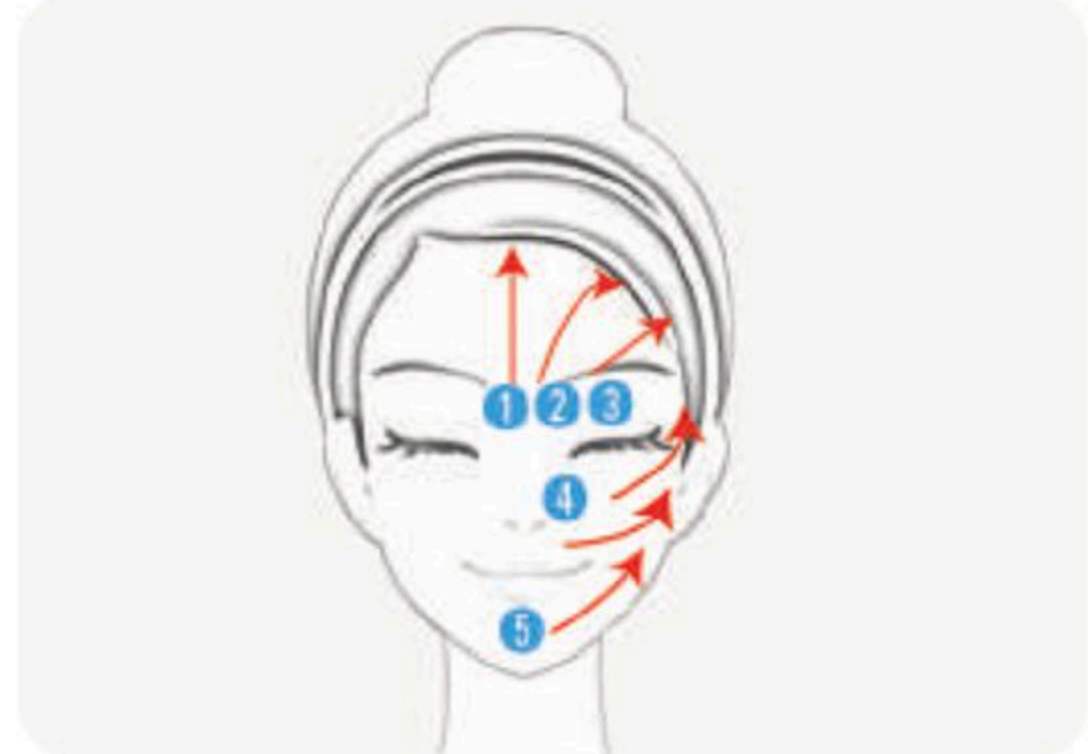

Stap 3

Na lichte contact met de brede zijde van het blad en de huid, masseer in dezelfde richting als op de afbeelding. Bij fysieke contact met de electrode zal de functionele rode LED oplichten, + ionen worden toegevoerd in combinatie met licht therapie.

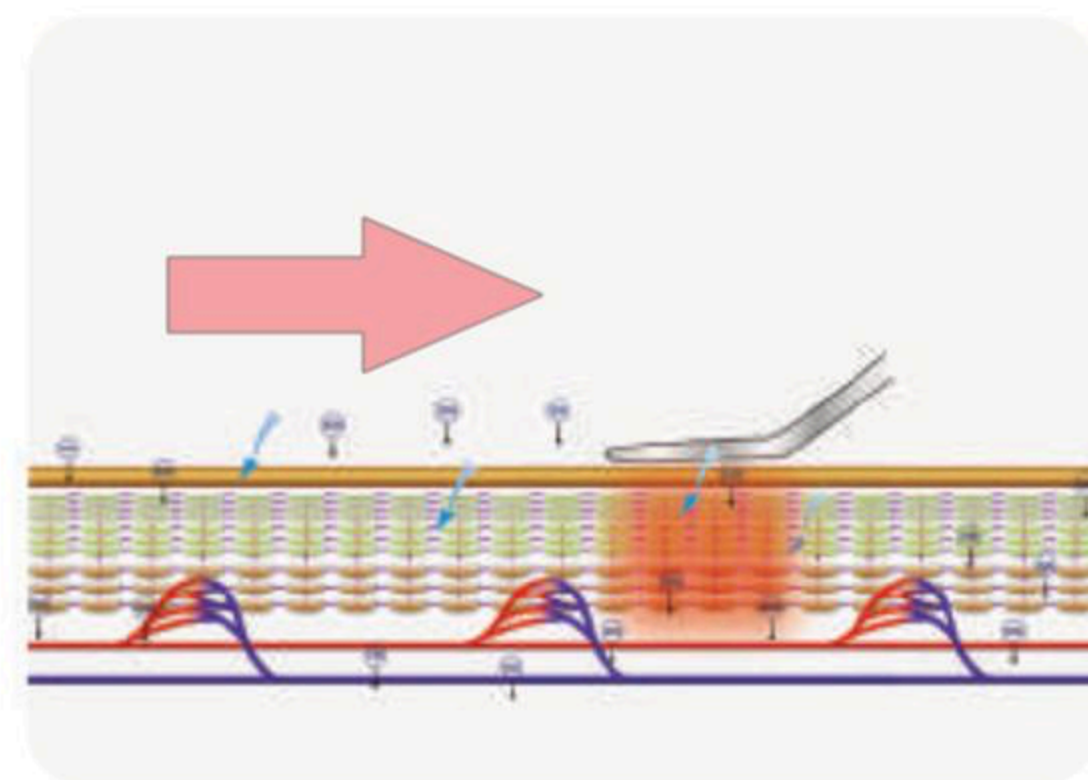

- ※ Je zult prikkeling voelen door circulerende stroom wanneer ionen worden toegevoerd. Dit is echter onschadelijk voor het menselijk lichaam.
- ※ Niet langdurig op één bepaalde plek gebruiken, gebruik soepele bewegingen.

Werkzaamheden van Reclar

- 1. Water Peeling**
Wanneer ultrasonische geluidsgolven zich door water heen verspreiden, dan penetreren deze golven zich diep in de huid waar je normaal gesproken met de hand of hulpmiddelen niet bij kan komen. Het verwijdt grondig en snel onzuiverheden vanuit de porie en de huid oppervlakte zoals verhardingen en talg.
- 2. Galvanisch**
Negative en positive ionen, gegenereert in het blad, penetreert cosmetische producten diep in de huid met ultrasonische massage. Poriën trekken samen en het verbetert de staat van de huid evenals de veerkrachtigheid.
- 3. Licht therapie**
Blauw licht helpt bij het verbeteren van huid problemen.
Rood licht vermindert vrije radicalen en het is effectief voor anti-aging, huidschade ontstaan door UV stralingen evenals rimpel vorming. Het is ook effectief voor rimpel verbetering en



- 4. Goud therapie**
We induceren 99,9% pure goud dat is effectief voor bloed circulatie, verheldering en toxische emissie, aan het blad zodat jij effectief gebruik kunt maken van ultrasonische therapie, galvanische functies en licht therapie functies. (Enkel Gouden versie)

※ Werkzaamheid product varieert per individueel.

- Model : RECLAR
- Gewicht : 90g
- Gemeten voltage : DC 5V
- Batterij : 3.7V / 600mAh (Li-Polymer)
- Laadduur : 80min • Gebruiksdur: 35min
- Formaat : 170 X 52 X 155 (mm)
- Materiaal : ABS
- Land : Geproduceerd in Korea
- Fabrikant : RNU Co., Ltd
- Adres : 58, Maeyeo-ro, Dong-gu, Daegu, Korea
- TEL : +82-80-854-0001



Voorzorgsmaatregelen

1. Buiten bereik houden van baby's en jonge kinderen.
2. Niet demonteren of aanpassen aan het product.
3. **Staak het gebruik als de huid geïrriteerd raakt, zoals roodheden, jeuk of als zwellingen opkomen tijdens het gebruik.**
4. Galvanische stroming kan effect hebben op de foetus, daarom raden wij het gebruik van G-Blue of G-Red niet aan bij zwangere vrouwen.
5. Laad het volledig op voor het eerste gebruik.
6. Bij het gebruiken van de Galvanische functie, nooit de ogen langdurig blootstellen aan de functionele LED.
7. **Let op! Als je het apparaat onderdompelt in water, of als er een groot hoeveelheid water in het apparaat terechtkomt, kan dit leiden tot storingen.**
8. **Dit apparaat is niet waterproof.**

Garantiebepalingen

1. Het product heeft een 1-jarige garantie vanaf de datum van aankoop.
 2. Garantie periode start vanaf de dag van aankoop, bewaar daarom het aankoopbewijs. (Als het datum van aankoop niet bevestigd kan worden, zal de garantie periode lopen vanaf de productie datum.)
 3. In de onderstaande gevallen vervalt het recht op garantie.
 - A. In geval van breukschade, ontstaan door het niet volgen van de bijgevoegde gebruikers handleiding
 - B. In geval van externe factoren zoals schok en het ontmantelen van het apparaat.
 - C. In geval van falen door natuurrampen.
 - D. In geval van onderdelen hevig aan slijtage bij gebruik.
- ※ Voor reparaties en uitwisselingen binnen de garantie periode, kan dit product worden vergoed in overeenstemming met compensatiecriteria voor consumentenschade, gemeld door het ministerie van Financiën en Economie.

Gebruikers Handleiding



RECLAR

Componenten en onderdelen

Componenten




Apparaat

USB kabel
(voor opladen)Gebruikers
handleiding

Waterdichte zakje

Naam van de onderdelen en scherm

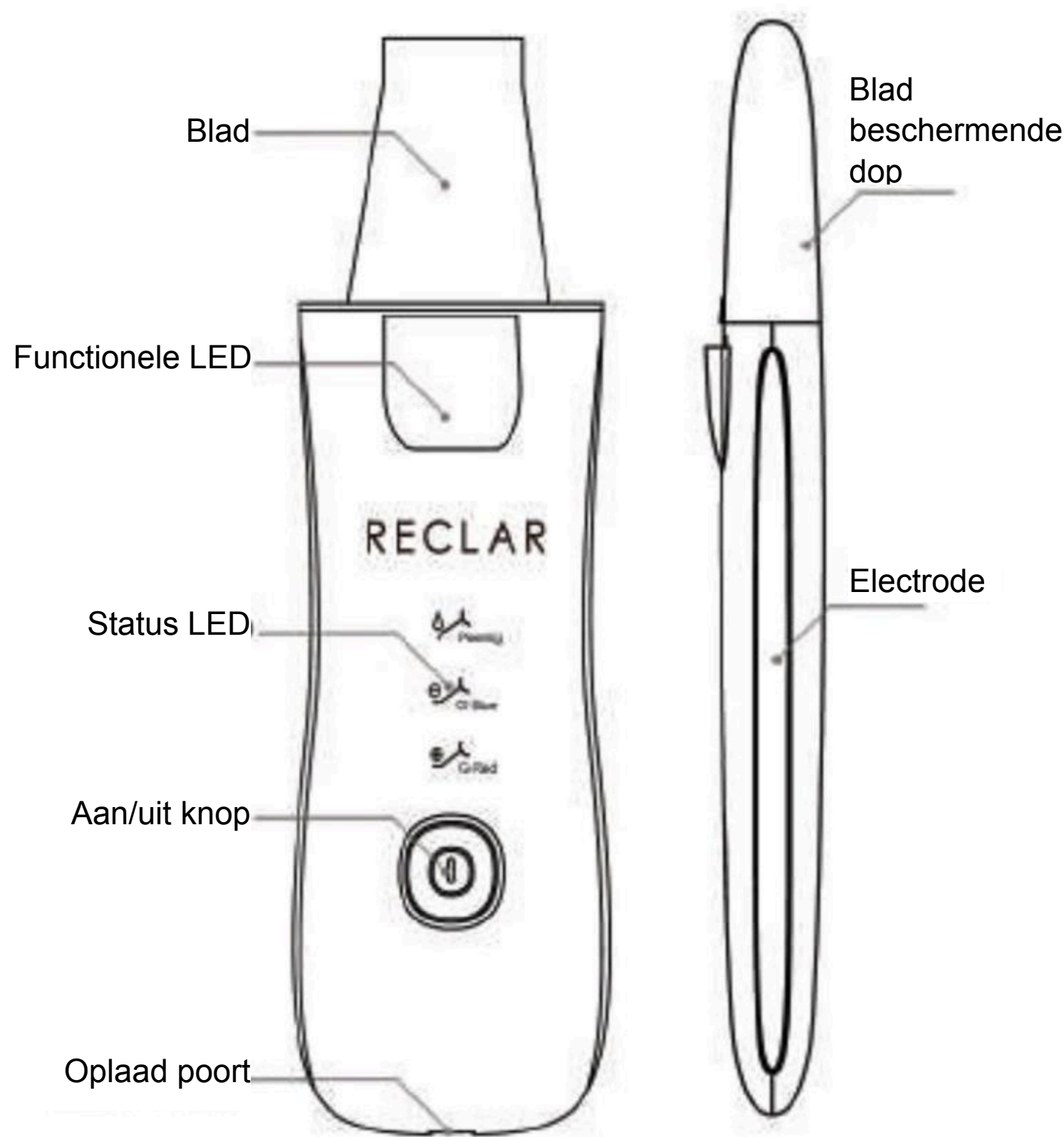

Gebruikswijze Reclar

- 1. Openen van beschermende dop**
Zoals afgebeeld, til lichtjes de beschermde kap omhoog. Het kapje is dan makkelijk te scheiden.
- 2. Aan / uit zetten**
Druk de aan/uit knop in (ca. 2 seconde) als het apparaat uit staat. Start deuntje zal afspelen en het apparaat zal opstarten. Dit is de standby modus, en LED lichtjes zullen knipperen.
- 3. Uit zetten**
Druk de aan/uit knop in tijdens gebruik of standby modus (ca. 2 seconden). Afsluit deuntje zal worden afgespeeld en het apparaat wordt uit gezet.
- 4. Automatisch uitzetten**
Na 5 minuten tijdens peeling, G-Blue, G-Red, schakelt het apparaat automatisch naar standby modus. Na 5 minuten op standby modus zonder gebruik zal het apparaat zich automatisch uitzetten.
- 5. Opladen**
Sluit micro USB oplader aan via het oplaad poort onderin het apparaat. Rood LED verschijnt tijdens het laden, blauw LED verschijnt als het apparaat volledig is opgeladen.

(bezig met
opladen)(volledig
opgeladen)

※ Dit product mag niet worden gebruikt tijdens het opladen.

Gebruikswijze Peeling

Ca. 5 min per keer / 3~4 keer per week


- **Verwijderd verhardingen, talg en onzuiverheden, verheldert de huid**

Stap 1

Verwijderen van verhardingen, talg en onzuiverheden. Huidzuiverend. Druk kort op de aan/uit knop vanaf standby modus. Peeling LED zal oplichten en de functie zal starten.


Stap 2

Na het reinigen van het gezicht, gebruik het apparaat als er nog water op het gezicht is. Als er onvoldoende vocht is op de huid, breng eerst een laagje vocht aan op gezicht. Als er teveel vocht is op het blad kan het de effectiviteit verminderen. Verwijder dan eerst het overtollige vocht.

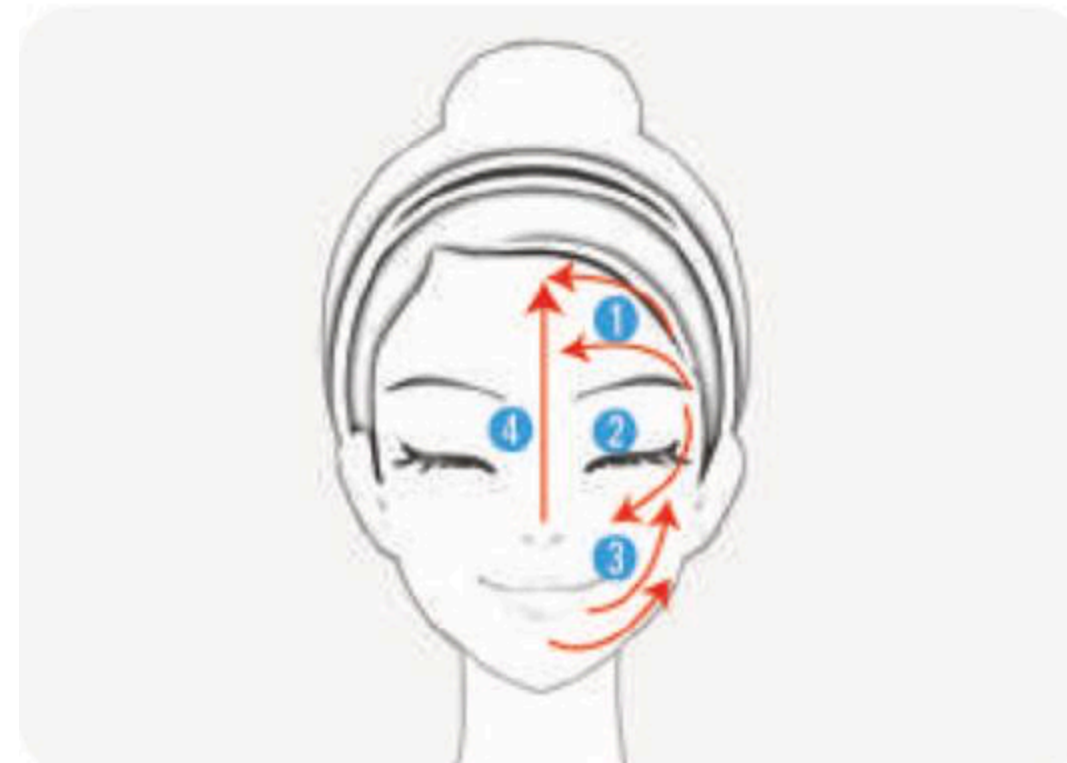

Stap 3

Na het lichtjes aanbrengen van de bladtijp op de huid, beweeg langzaam, om zodanig het water voorzichtig eraf te schrapen in de richting volgens afbeelding.

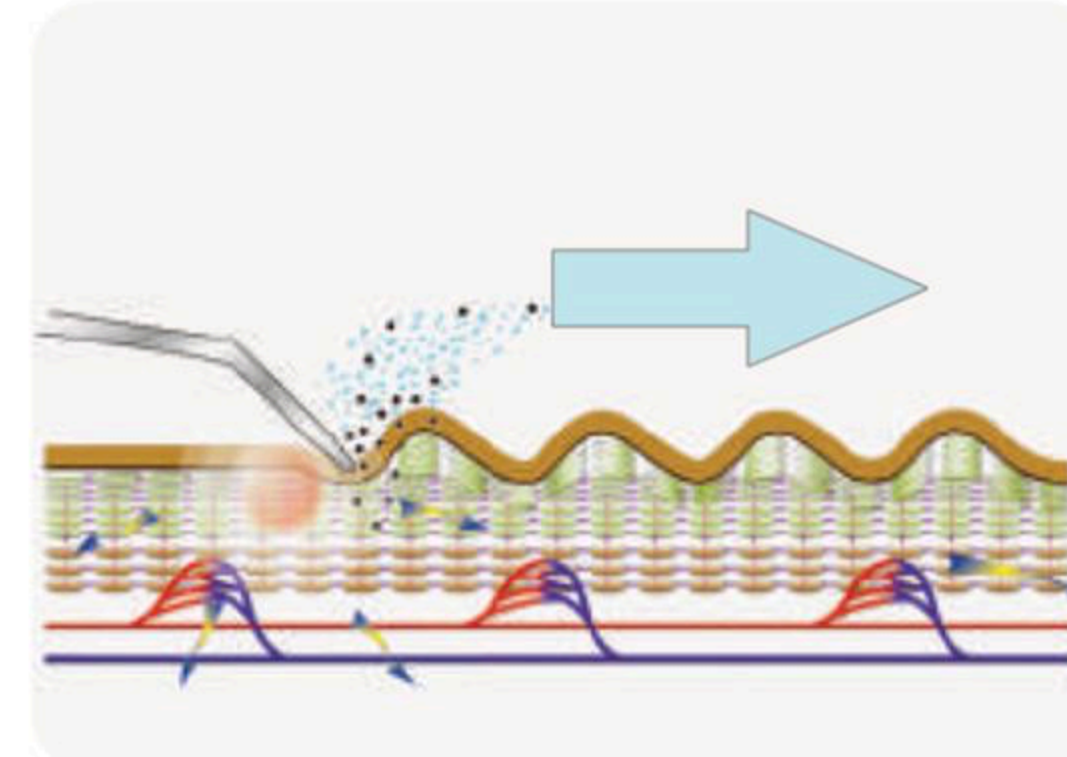

- ※ Na peeling, de huid wordt meestal droog. Het is daarom beste om een hydraterende essence of masker te gebruiken.
- ※ Niet langdurig op één bepaalde plek gebruiken, gebruik soepele bewegingen.

Gebruikswijze G-Blue

Ca. 5 min per keer / dagelijks mogelijk

- **Ultrasonische massage, voedend, kalmeert huid problemen en ontstekingen.**


Stap 1

Druk aan/uit knop 2 keer kort in vanuit standby modus en 1 keer vanuit peeling modus. Hierna zal G-Blue LED oplichten en de functie starten.

Stap 2


Breng cosmetica (ampoule of essence) aan op de huid en gebruik het in de richting volgens afbeelding.

- ※ G-Blue modus is effectief in absorberen van vitamines en je kunt het gebruiken in combinatie met masker.

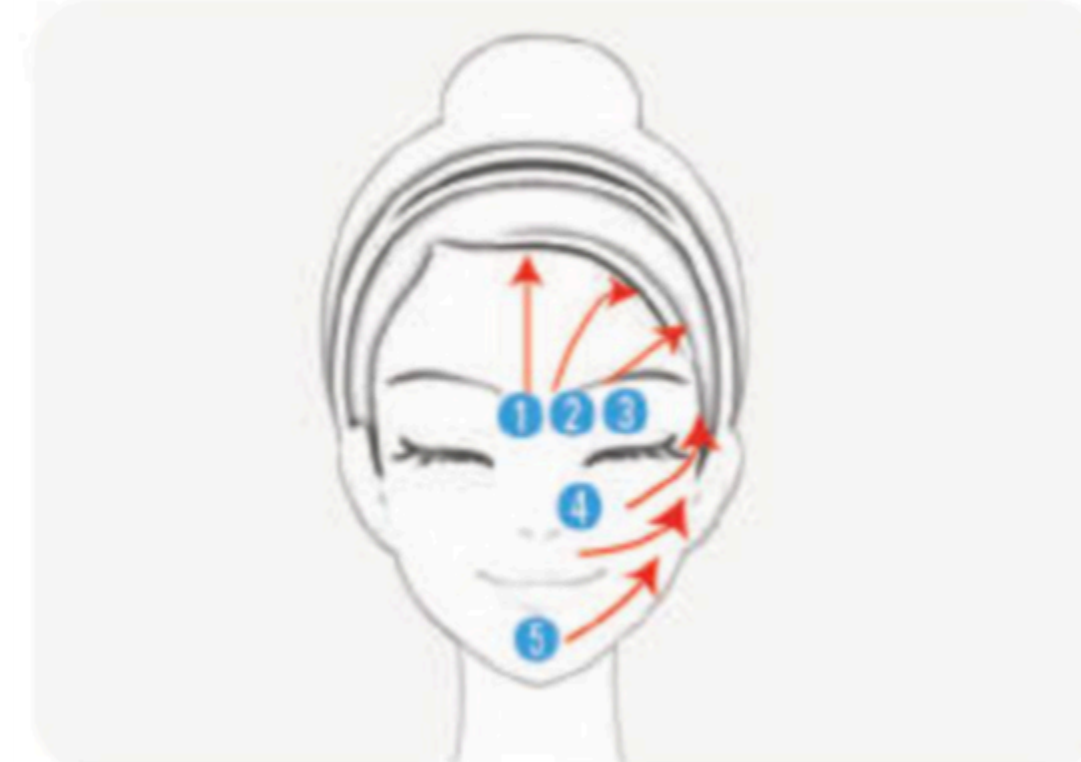

Stap 3

Na lichte contact met de brede zijde van het blad en de huid, masseer in hetzelfde richting als afbeelding. Bij fysieke contact met de electrode zal de functionele rode LED oplichten, ionen worden toegevoerd in combinatie met licht therapie.

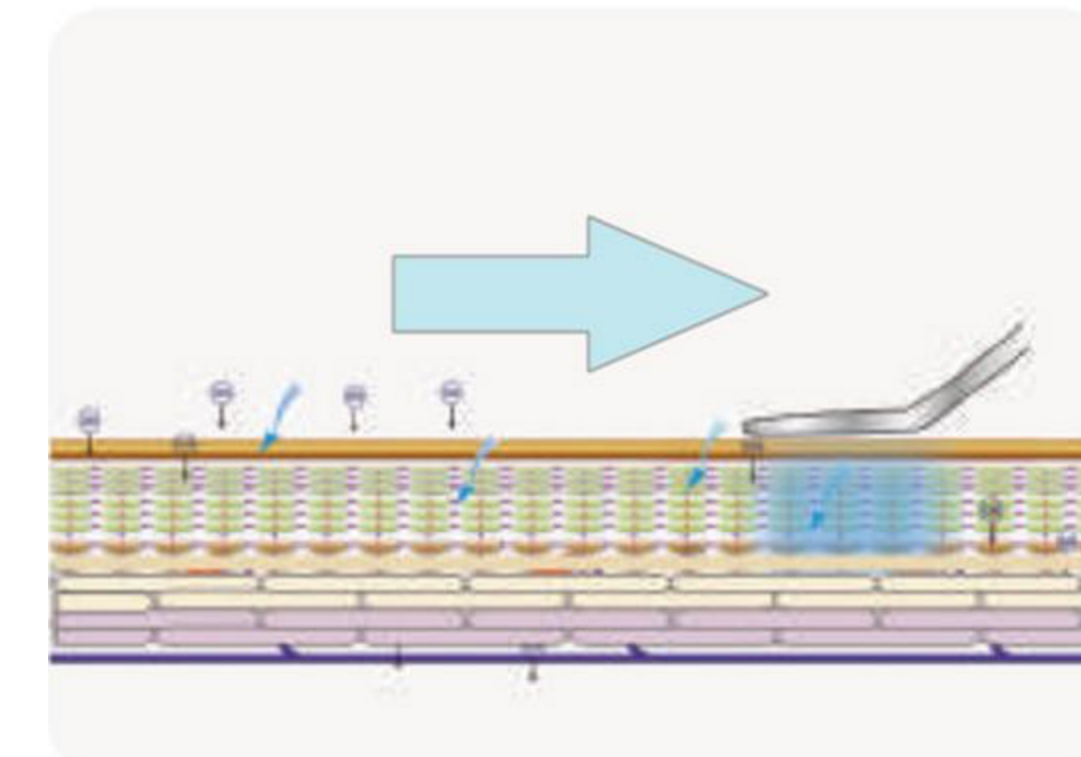

- ※ Je zult prikkeling voelen door circulerende stroom wanneer ionen worden toegevoerd. Dit is echter onschadelijk voor het menselijk lichaam.
- ※ Niet langdurig op één bepaalde plek gebruiken, gebruik soepele bewegingen.