

GEBRUIKSAANWIJZING BEDTAFEL "MARMER" 191100

Lees deze veiligheidsinstructies voor gebruik en bewaar ze zorgvuldig

1 veiligheid indicatie:

- ❖ Gebruik dit artikel altijd in overleg met uw arts of leverancier om de juiste afstelling en het gebruik van het apparaat te bepalen
- ❖ Niet gebruiken bij extreme temperaturen (boven de 38 graden of onder nul)
- ❖ U dient zorgvuldig alle onderdelen van dit artikel te (laten) controleren
- ❖ Controleer regelmatig of alle schroeven zijn aangedraaid
- ❖ Geen enkele wijziging dient te geschieden op dit artikel, gebruik alleen originele onderdelen en laat reparaties alleen uitvoeren door erkende bedrijven
- ❖ Zorg voor gebruik dat alle onderdelen goed op hun plaats zitten
- ❖ Reinigen dient te gebeuren met niet agressieve schoonmaakmiddelen.

2 Installatie:


Alleen een specialist kan uw vertellen hoe u deze dient te gebruiken.

Bij verkeerd gebruik kan dit leiden tot schade aan het apparaat of de gebruiker.

Vraag de aanmeter hoe u het product dient te gebruiken en zorg ervoor dat u dit begrijpt.

Opening:

Pak de bedtafel uit de verpakking en leg de onderdelen op de grond.

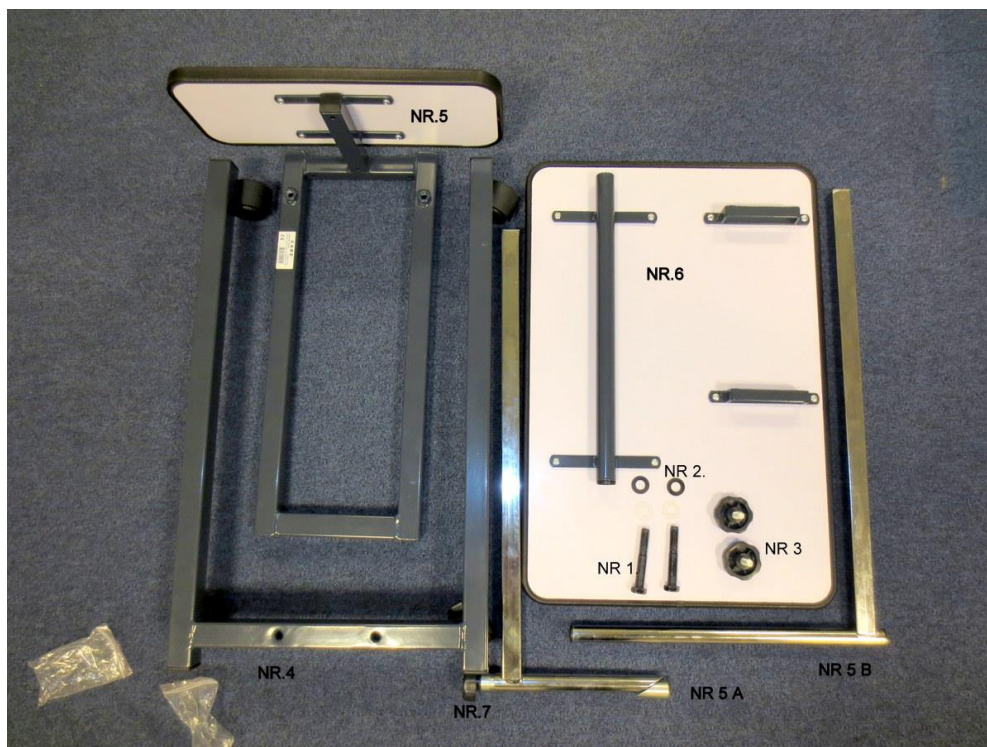


GEbruIKSAANWIJZING BEDTAFEL "MARMER" 191100

Stap 1 en 2;

Leg de twee kunststofringen (2) op het framework (4).

Zet hier het frame met kleine blad (5) haaks bovenop en bevestig deze met de twee bouten (1).

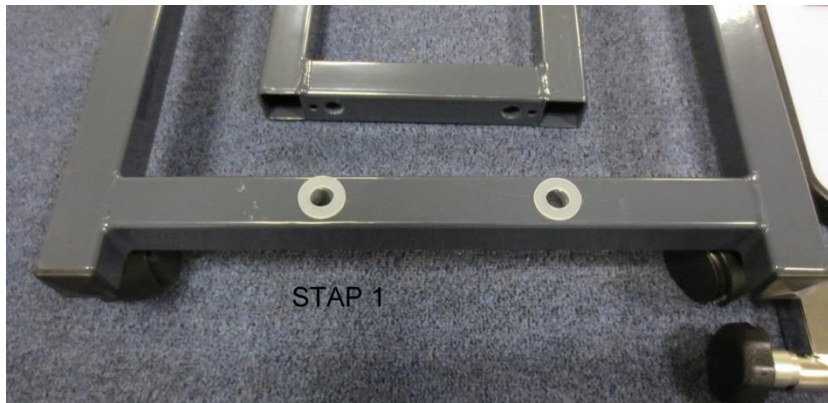

Stap 3;

Draai de knoppen (3) in de gaten van het frame onder het kleine blad (5)



GEBRUIKSAANWIJZING BEDTAFEL "MARMER" 191100

Stap 4;

Laat de buizen 5a en 5b in de buizen van 5 zakken
Let op! de draaiknop (7) aan de achterzijde



Stap 5;

Schuif het grote blad over 5a en 5b en draai deze vast met de draaiknop (7)



De bedtafel moet regelmatig worden schoongemaakt met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.