

Verwendung vom Gleitsack bei einem Strumpf mit geschlossener Fußspitze

Folgen Sie den Anweisungen - Anziehen mit Gleitsack - Abbildung 1 und 2, anschließend weiter mit:



Stecken Sie den Gleitsack mit der breiten Kante bis an die Ferse in den Strumpf.



Legen Sie HandyFix mit den Löffeln so flach wie möglich **auf** die Matte und schieben Sie Ihren Fuß auf dem Gleitsack in den Strumpf.

Nun folgen Sie weiter Abbildung 6, 7 und 8. Danach entfernen Sie den Gleitsack indem Sie diesen an der Schlaufe, oben an der Hinterseite Ihres Beines, aus dem Strumpf ziehen.

Ausziehen mit Gleitsack



Öffnen Sie den Gleitsack und steigen Sie mit dem Strumpfbein in den Sack.



Befestigen Sie das elastische Klettband etwas oberhalb Ihres Knöchels. Nicht zu stramm.



Stecken Sie die grauen Löffel an beiden Seiten des Beines zwischen Bein und Strumpf.



Schieben Sie das HandyFix langsam nach unten, achten Sie darauf, dass der Strumpf **über** den Gleitsack rutscht, bis der Strumpf ausgezogen ist.



HANDY
LEGS

Ihr Lieferant:



Für Ihren Komfort!

HandyFix ist ein Produkt der HandyCare B.V. www.handylegs.com

Haben Sie eine Frage oder Anmerkung?

Wir stehen gerne zu Ihrer Verfügung.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf:
www.handylegs.de

Kontaktdaten:

HandyLegs BV
Botterstraat 47
1271 XL Huizen
Niederlande

Tel : +31(0)35 6922875
Fax : +31(0)35 6922876
Mail: info@handylegs.com
Web : www.handylegs.com

2019-04



HANDYFIX HANDYFIX HANDYFIX HANDYFIX

HANDY
LEGS

HANDYFIX



Zum selbstständigen
An- und Ausziehen von
Kompressionsstrümpfen


HandyFix

Mit HandyFix können Sie Ihre Kompressionsstrümpfe selbstständig an- und ausziehen. Wußten Sie, daß Sie HandyFix auch für normale Socken und Kniestrümpfe gebrauchen können?

Diese Gebrauchsanweisung begleitet Sie Schritt für Schritt beim An- und Ausziehen Ihrer Kompressionsstrümpfe. Selbstverständlich können Sie auch um eine persönliche Anleitung bei Ihrem Kompressionsstrumpf Lieferanten, Ihrer Heimpflege und/oder Ergotherapeuten bitten.

Auf unserer Website www.handylegs.de finden Sie ausführliche Anleitungsvideo's. In diesen Videos zeigen wir wie Sie HandyFix optimal benutzen. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie mit Ihrem HandyFix die Antirutschmatte und den Gleitsack erhalten haben. Wenn dies nicht der Fall ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Lieferanten auf.

Achtung: der mitgelieferte Gleitsack kann anders aussehen als das dargestellte Exemplar. Lesen Sie unbedingt immer die hinzugefügte Gebrauchsanweisung vom Gleitsack.

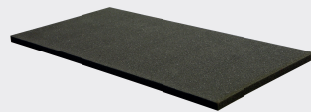

Antirutschmatte



Gleitsack mit elastischem Klettband

Bevor Sie anfangen

Es ist Wichtig das Sie das Folgende selbstständig ausführen können:


1. Auf einem Stuhl (ohne Armlehnen) oder auf dem Bettrand sitzen können.
2. Bis halbwegs Ihrer Wade reichen können.
3. Etwas nach vorne beugen können.
4. Selbstständig das Bein strecken und beugen können.
5. Genügend Kraft in beiden Händen, um etwas fest zu halten.

Aufgepaßt!

- Verwenden Sie HandyFix ausschliesslich so, wie es in der Gebrauchsanweisung beschrieben steht.
- Der Griff wirkt federnd. Vermeiden Sie die Beine des HandyFix mit Kraft auseinander zu ziehen, um das Risiko des Auseinanderbrechen zu vermeiden.
- Stehen oder laufen Sie nicht mit dem Gleitsack um Ihren Fuß, um ein mögliches Ausrutschen zu vermeiden.
- Wenn Sie HandyFix nicht gebrauchen, legen Sie es an einem sicheren Ort, damit Sie nicht über das Hilfsmittel stolpern.
- Reinigen Sie HandyFix mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch. Gut abtrocknen mit einem trockenem Tuch. Den Gleitsack, die Neoprenwickel und die Antirutschmatte können Sie von Hand (bei max. 30 Grad) waschen. Diese Produkte nicht in den Trockner legen und auch nicht Bügeln. Für alle Produkte gilt – keine chemische Reinigung oder Behandlung mit Bleichmitteln.
- HandyCare Holding B.V. haftet nicht für die Folgen einer anderen als der in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Verwendung.

HandyFix ist zerlegbar

HandyFix lässt sich im Handumdrehen auseinandernehmen. Dadurch ist es einfach mitzunehmen auf Reisen.

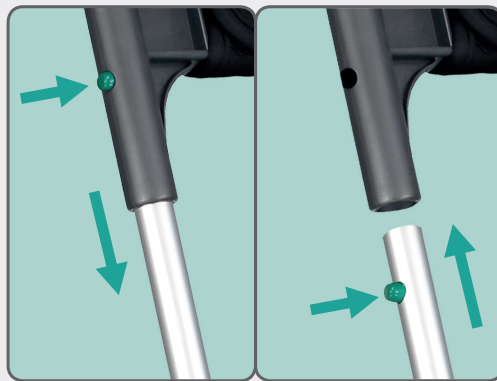

Drücken Sie auf den grünen Knopf und schieben Sie die Teile in- und auseinander.

Anziehen mit Gleitsack



Achtung: Ziehen Sie die Beine des HandyFix nicht weiter auseinander, Lesen Sie unbedingt immer vorab die Gebrauchsanweisung.



Spannen Sie den Strumpf über den grünen Löffel mit der Ferse nach obenweisend.



Stecken Sie Ihren Fuß in den Gleitsack.



Setzen Sie sich auf einen Stuhl und legen Sie die Antirutschmatte unter Ihren Fuß. Schlagen Sie den Strumpf rund 5cm um.



Falten Sie die Umschlagklappe vom Gleitsack nach innen, der Stoff ist nun doppelt.



Halten Sie HandyFix mit dem Löffel so flach wie möglich auf der Matte und schieben Sie Ihren Fuß mit Gleitsack in den Strumpf.

TIPP! Indem Sie Ihren Fuß hin und her über die Matte reiben, bringen Sie den Strumpf in die korrekte Position. Falten im Strumpf lassen sich problemlos mit einem Gummihandschuh entfernen.



Reiben Sie Ihren Fuß / Ferse vorwärts über die Matte, wiederholen Sie dies bis der Strumpf über die Ferse ist und der Fuß richtig paßt.




Ziehen Sie den Strumpf mit Hilfe von HandyFix nach oben.



Entfernen Sie den Strumpf vom HandyFix.



Reiben Sie Ihren Fuß hin und her über die Matte bis die Schlaufe frei kommt.

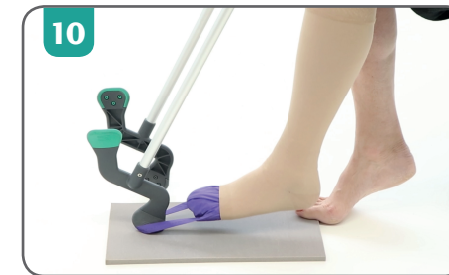

Halten Sie das HandyFix am Griff fest und legen Sie den grauen Löffel auf die Schlaufe. Drücken Sie den Löffel auf der Schlaufe kräftig gegen die Matte.



Ziehen Sie Ihr Bein langsam rückwärts bis der Gleitsack aus dem Strumpf gezogen ist.