

**DEX™**

A WIRELESS WORLD

# GEBRUIKSAANWIJZING

## **RC-DEX AFSTANDBEDIENING**

**WIDEX®**  
HIGH DEFINITION HEARING



# INHOUD

<b>UW NIEUWE DEX™ AFSTANDBEDIENING</b> .....	<b>5</b>
Beoogd gebruik .....	5
Omschrijving van het apparaat .....	6
Vooraanzicht .....	6
Achteraanzicht .....	7
<b>ACCESSOIRES</b> .....	<b>8</b>
<b>DE BATTERIJ</b> .....	<b>9</b>
Vervangen van de batterij .....	10
<b>DE AFSTANDBEDIENING GEBRUIKEN</b> .....	<b>12</b>
Bereik .....	12
Light-emitting diode (LED) .....	12
Aanpassen volume .....	13
De mute-stand van het toestel inschakelen .....	13

Veranderen van programma .....	14
Zen+ .....	14
Schakelaar vergrendeling .....	14
<b>ONDERHOUD VAN UW AFSTANDSBEDIENING .....</b>	<b>15</b>
<b>WAARSCHUWINGEN .....</b>	<b>18</b>
<b>ALS DE AFSTANDSBEDIENING NIET WERKT .....</b>	<b>22</b>
<b>REGULATORY INFORMATION .....</b>	<b>24</b>
<b>SYMBOLEN .....</b>	<b>30</b>

## UW NIEUWE DEX™ AFSTANDSBEDIENING

We hopen dat u veel profijt zult hebben van uw Widex afstandsbediening. In deze gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd hoe de afstandsbediening werkt.



### WAARSCHUWING

Dit boekje bevat belangrijke informatie en instructies. Lees deze gebruiksaanwijzingen daarom aandachtig door voordat u de afstandsbediening gaat gebruiken.

## Beoogd gebruik


Deze afstandsbediening is bedoeld om samen te werken met Widex draadloze hoortoestellen.

## Omschrijving van het apparaat

Met de RC-DEX afstandsbediening kan het volume en het luisterprogramma van het hoortoestel eenvoudig worden ingesteld. Tevens is de afstandsbediening voorzien van een light-emitting diode (LED) voor visuele controle.


### Vooraanzicht

1. Light-emitting diode (LED)
2. Volume hoger
3. Schakelaar vergrendeling
4. Programmawisseling
5. Volume lager

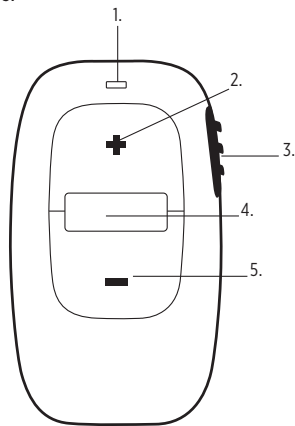

## Achteraanzicht



1. Batterijdeksel
2. Oogje voor sleutelhanger/bevestigingskoordje

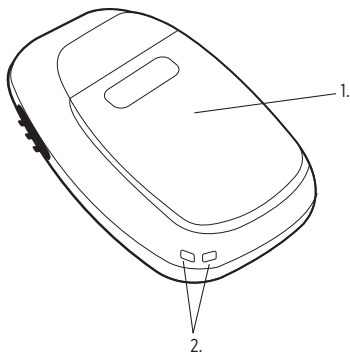

Hebt u hulp nodig om te bepalen wat het serienummer (meestal zes of zeven cijfers) van uw toestel is, neem dan contact op met uw audicien.

## ACCESSOIRES

1. Batterij
2. Sleutelring/koordje

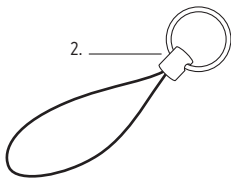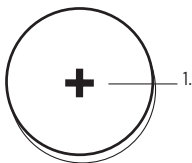



## DE BATTERIJ


**De batterij die voor deze afstandsbediening moet worden gebruikt is van het type: Lithium CR2032.**

Nieuwe batterijen kunt u kopen bij uw audicien. Let u op de vervaldatum en op de aanbevelingen over het weggooien van lege batterijen die op de verpakking staan vermeld.

De afstandsbediening is ingeschakeld indien een werkende batterij correct in de batterijlade is geplaatst. De gebruiksduur van de batterij is tot 12 maanden, afhankelijk van hoe vaak u de afstandsbediening gebruikt.

## Vervangen van de batterij


1. Schuif het batterijdeksel naar beneden om deze te verwijderen.
2. Druk, zoals afgebeeld, op de batterij om deze op te lichten en uit de houder te nemen.

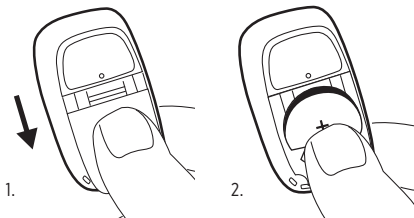

### LET OP

Houd de afstandsbediening bij het vervangen van de batterij voor de zekerheid altijd boven een tafel.

3. Plaats de nieuwe batterij onder een hoek, zoals afgebeeld en druk de batterij op zijn plaats. Het plusteken (+) op de batterij moet nu zichtbaar zijn.
4. Plaats het batterijdeksel weer terug.

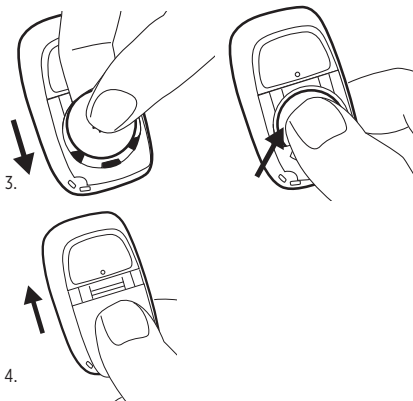

## DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

De afstandsbediening is voorzien van een oogje om deze aan een sleutelhanger o.i.d. te bevestigen.

### **Bereik**

Het bereik van de afstandsbediening bedraagt tot 1.0 meter.

### **Light-emitting diode (LED)**

Een groen lampje brandt als één van de toetsen wordt ingedrukt.

## **Aanpassen volume**

Druk kort op de 'volume hoger' toets (+) om het volume te verhogen. Druk op de 'volume lager' toets (-) om het volume te verlagen.

Drukt u op de volumetoetsen, dan hoort u steeds een kort piepje. Is het maximale of minimale volume bereikt, dan wordt dit weergegeven met een aanhoudende toon.

## **De mute-stand van het toestel inschakelen**

Blijf de toets 'volume lager' op de afstandsbediening ingedrukt houden totdat een lange pieptoon heeft geklonken en deze gestopt is. Door één van volumetoetsen kort in te drukken wordt het geluid weer ingeschakeld.

## **Veranderen van programma**

Met uw afstandsbediening kunt u een aantal luisterprogramma's inschakelen, afhankelijk van de programma's die in uw hoortoestel zijn ingesteld. Druk steeds kort op de programmaknop om van luisterprogramma te veranderen.

### **Zen+**

Is uw hoortoestel voorzien van het speciale Zen+ programma, dan schakelt u dit in door de programmaknop ongeveer 2 sec. ingedrukt te houden. Door vervolgens steeds kort op de programma-knop te drukken kiest u uit de verschillende Zen-stijlen. Door de programma- knop nogmaals 2 sec. in te drukken keert u terug naar de standaard luisterprogramma's.

### **Schakelaar vergrendeling**

De knoppen van de afstandsbediening kunnen worden vergrendeld, zodat ze niet onbedoeld kunnen worden ingedrukt. Schuif de vergrendeling naar beneden om te vergrendelen en naar boven om te ontgrendelen.

## ONDERHOUD VAN UW AFSTANDSBEDIENING

Uw afstandsbediening is een kostbaar instrument, behandel het daarom met zorg. Hierna volgen enkele adviezen die u kunt opvolgen om de levensduur te verlengen:



### WAARSCHUWING

- Stel de afstandsbediening niet bloot aan extreme temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
- Dompel niet onder in water of andere vloeistoffen.



### LET OP

- Reinig het apparaat met een zachte doek. Gebruik nooit alcohol, sterke reinigingsmiddelen of andere (zure) vloeistoffen.
- Laat de afstandsbediening niet vallen.



### LET OP

- Het is niet aan te raden om uw mobiele telefoon/PDA dichtbij uw afstandsbediening te houden, bijv. in dezelfde jaszak.
- Probeer nooit zelf het apparaat te openen of te repareren. (Voorbehouden aan geautoriseerd personeel).





## WAARSCHUWING

- **Draag uw afstandsbediening nooit bij u tijdens een warmtebehandeling, bij het maken van röntgenfoto's, MRI-scans, CT-scans of tijdens radiotherapie.** en leg de afstandsbediening nooit in een magnetron. Dit zijn enkele soorten straling die de apparatuur kunnen beschadigen.
- Andere typen straling, bijvoorbeeld afkomstig van bepaalde alarm-systemen en mobiele telefoons zijn zwakker en kunnen uw afstandsbediening niet beschadigen. Het kan echter voorkomen dat straling van installaties als bepaalde anti-diefstalalarmsystemen, automatisch bewegingsmelders en andere elektronica hoorbare interferentie veroorzaken tijdens het gebruik van afstandsbediening en hoortoestellen.

## WAARSCHUWINGEN



### WAARSCHUWING

**Batterijen kunnen gevaarlijk zijn indien ze worden ingeslikt of niet juist worden gebruikt. Neem nooit een batterij of een hoortoestel in de mond, omdat u het risico loopt deze in te slikken. Inslikken of onjuist gebruik kunnen resulteren in ernstig letsel of zelfs overlijden. Neem bij inslikken onmiddellijk contact op met een arts.**

- Houd de afstandsbediening en de onderdelen hiervan, accessoires en batterijen altijd buiten het bereik van kinderen en ieder ander die dergelijke voorwerpen kan inslikken of zichzelf letsel kan toebrengen. Vervang de batterij niet waar zij bij zijn en laat hen niet zien waar u de batterijen bewaart. Voer lege batterijen zorgvuldig af.
- Gebruik de afstandsbediening nooit zonder toestemming in een vliegtuig of ziekenhuis.
- De afstandsbediening is niet getest op gebruik in mijnen of andere plaatsen waar explosiegevaar bestaat.



### **WAARSCHUWING**

Er bestaat explosiegevaar indien de batterij wordt vervangen door een onjuist type of indien deze wordt opgeladen.



### **LET OP**

- Hoewel uw afstandsbediening voldoet aan de meest strenge internationale regels omtrent elektromagnetische compatibiliteit, is het mogelijk dat het interferentie veroorzaakt met andere apparatuur, zoals medische apparaten.



## WAARSCHUWING

### **Interferentie met werkende implantaten**

- Als voorzorgsmaatregel adviseren we u om de richtlijnen op te volgen zoals die worden gegeven door de fabrikanten van defibrilators en pacemakers aangaande het gebruik van mobiele telefoons:
- Draagt u een werkend implantaat, houd dan de draadloze hoortoestellen en hoortoestelaccessoires zoals een draadloze afstandsbediening minstens 15 cm bij het implantaat vandaan.

- Ervaart u interferentie, gebruik de hoortoestellen en/of de hoortoestelaccessoires dan niet en neem contact op met de fabrikant van het implantaat. Interferentie kan ook worden veroorzaakt door elektrische leidingen, elektrostatische ontlading, metaaldetectors, etc.
- Hebt u een actief hersenimplantaat, neem dan contact op met de fabrikant van dat implantaat voor overleg over mogelijke risico's.

Hebt u een implanteerbaar apparaat, dan adviseren we u om magneten\* minimaal 15 cm uit de buurt van het implantaat te houden. (\*= kan worden omschreven als Autophone magneet, hoortoesteldoosje, magneet in een gereedschap, etc.)

## ALS DE AFSTANDSBEDIENING NIET WERKT

Hier vindt u enkele adviezen die u kunt opvolgen als uw afstandsbediening niet of niet goed werkt. Blijft het probleem bestaan, raadpleeg dan uw audicien.

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
De afstandsbediening werkt niet	De batterij van de RC is leeg of werkt niet	Vervang de batterij
	De hoortoestelbatterij is leeg	Vervang de batterij
	De afstandsbediening bevindt zich buiten het bereik (< 1m)	Verplaats de afstandsbediening tot binnen het zendbereik

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
De afstandsbediening werkt niet	Sterke elektromagnetische interferentie	Ga weg van de stoorbron
	RC-DEX en hoortoestel zijn niet gematcht	Neem contact op met uw audicien

## REGULATORY INFORMATION

FCC ID: TTY-RCD

IC: 5676B-RCD

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be



determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**NOTE:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

### **Industry Canada Statement / Déclaration d'industrie Canada**

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Directive 1999/5/EC

Hierbij verklaart Widex A/S dat deze RC-DEX voldoet aan de essentiële voorwaarden en andere relevante bepalingen van 1999/5/EC.

Een kopie van de Declaration of conformity volgens 1999/5/EC is te vinden op

<http://www.widex.com/doc>



**N26346**



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, onderdelen en substanties die gevaarlijk kunnen zijn en die een risico kunnen vormen voor de gezondheid en het milieu indien deze wanneer ze overbodig zijn geworden niet correct worden afgevoerd.






Gooi hoortoestellen, hoortoestelaccessoires en batterijen niet weg met huishoudelijk afval.

Hoortoestellen, batterijen en hoortoestelaccessoires moeten worden afgevoerd als elektrische en elektronische apparatuur, of worden afgegeven bij uw audicien. Het juist afvoeren helpt de gezondheid en het milieu te beschermen.

## SYMBOLLEN

Veelgebruikte symbolen door Widex A/S voor de etikettering van medische hulpmiddelen (labels/IFU/enz.)

Symbol	Titel/beschrijving
	<b>Fabrikant</b> Het product wordt geproduceerd door de fabrikant waarvan de naam en het adres naast het symbool staan. Indien van toepassing wordt ook de productiedatum genoemd.
	<b>Productiedatum</b> De datum waarop het product is geproduceerd.
	<b>Vervaldatum</b> De datum waarna het product niet meer mag worden gebruikt.
	<b>Batchcode</b> De batchcode van het product (lot- of batch-id).

Symbool	Titel/beschrijving
	<b>Catalogusnummer</b> Het catalogus-/itemnummer van het product.
	<b>Serienummer</b> Het serienummer van het product.*
	<b>Tegen direct zonlicht beschermen</b> Het product moet tegen lichtbronnen worden beschermd en/of Het product moet uit de buurt van warmtebronnen worden gehouden.
	<b>Droog bewaren</b> Het product moet tegen vocht worden beschermd en/of Het product moet tegen regen worden beschermd.
	<b>Onderste temperatuurgrens</b> De laagste temperatuur waaraan het product veilig kan worden blootgesteld.

Symbool	Titel/beschrijving
	<p><b>Bovenste temperatuurgrens</b></p> <p>De hoogste temperatuur waaraan het product veilig kan worden blootgesteld.</p>
	<p><b>Temperatuurgrenzen</b></p> <p>De hoogste en laagste temperaturen waaraan het product veilig kan worden blootgesteld.</p>
	<p><b>Zie de gebruiksaanwijzingen</b></p> <p>In de gebruiksaanwijzingen staat belangrijke waarschuwinginformatie (waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen) die vóór gebruik van het product moet worden gelezen.</p>
	<p><b>Opgelet/Waarschuwing</b></p> <p>Tekst met een symbool voor opgelet/waarschuwing moet vóór gebruik van het product worden gelezen.</p>



Symbool	Titel/beschrijving
	<p><b>WEEE-symbool</b>  <b>"Niet bij het reguliere afval"</b></p> <p>Als het product wordt afgedankt, moet het voor recycling worden ingeleverd bij een inzamelpunt.</p>
	<p><b>CE-keurmerk</b></p> <p>Het product voldoet aan de eisen in de Europese richtlijnen inzake het CE-keurmerk.</p>
	<p><b>Let op</b></p> <p>Het product moet volgens de R&amp;TTE-richtlijn 1999/5/EG worden aangemerkt als een Klasse 2-product wat betekent dat aan het gebruik ervan in sommige EU-lidstaten beperkingen zijn gesteld.</p>







**WIDEX A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Denmark  
<https://global.widex.com>



**Gebruiksaanwijzing no:**  
9 514 0276 007 #03  
**uitgave:**  
2020-09

