

DSF 130



Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
Konformitätserklärung.....	3
Lebensdauer	3
Entsorgung	3
Typenschild.....	3
Wiedereinsatz	3
Gewährleistung	3
Teile des Produkts.....	4
Indikation.....	4
Lieferumfang	4
Sicherheitshinweise	4
Montage	5
Höheneinstellung der FüÙe	5
Reinigung Wartung.....	5
Technische Daten	5
Parts of the product	8

Vorwort

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Drive DeVilbiss entschieden haben.

Das Design, die Funktionalität und die Qualität dieses Produktes werden Sie nicht enttäuschen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Sie erhalten wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps zur richtigen Benutzung und Pflege. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Drive DeVilbiss-Fachhändler, der Ihnen das Produkt geliefert hat.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle notwendigen Hinweise für die Anpassung und Bedienung. Die aktuellste Bedienungsanleitung ist als PDF online abrufbar oder kann beim Kundenservice angefordert werden.

Hierbei können vergrößerte Formate für sehbehinderte Personen dargestellt werden. Blinde Patienten müssen durch ihre Begleitperson eingewiesen werden. Reparaturen sowie einige Einstellungen erfordern eine spezielle technische Ausbildung und müssen daher vom Sanitätsfachhandel vorgenommen werden.

Konformitätserklärung

Für das beschriebene Produkt erklärt die Drive Medical GmbH & Co. Kg die Konformität gemäß der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745.

Lebensdauer

Unser Unternehmen geht bei diesem Produkt von einer Produktlebensdauer von fünf Jahren aus, soweit das Produkt innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden.


Diese Lebensdauer kann deutlich überschritten werden, wenn das Produkt sorgfältig behandelt, gewartet, gepflegt und genutzt wird und sich nach der Weiterentwicklung der Wissenschaft und Technik nicht technische Grenzen ergeben.

Die Lebensdauer kann sich durch extremen Gebrauch und unsachgemäße Nutzung allerdings auch erheblich verkürzen. Die Festlegung der Lebensdauer durch unser Unternehmen stellt keine zusätzliche Garantie dar.

Entsorgung

Sollten Sie das Produkt nicht mehr benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder bringen Sie das Produkt zu Ihrer lokalen Entsorgungsstelle.

Typenschild

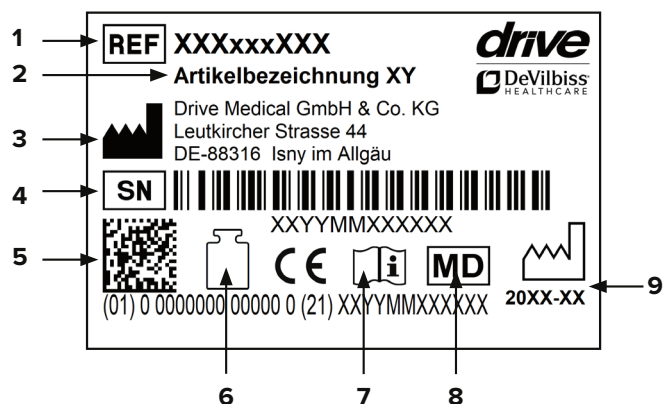

1 Artikelnummer | 2 Artikelbezeichnung | 3 Hersteller | 4 Seriennummer | 5 UDI-Code | 6 Max. Belastung | 7 Gebrauchsanweisung beachten | 8 Medizinprodukt | 9 Produktionsdatum (Jahr/Monat)

Wiedereinsatz

Dieses Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Beachten Sie, dass auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.

Das Produkt muss durch den Fachhandel überprüft, gereinigt und für den Wiedereinsatz in einen einwandfreien Zustand versetzt werden.

Bei der Aufbereitung sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten und werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Erhältliches Zubehör finden Sie unter www.drivedevilbiss.de oder bei Ihrem Fachhändler.

Gewährleistung

Für das von uns gelieferte Produkt beträgt die Gewährleistungsfrist 24 Monate ab Kaufdatum.

Sofern nachweislich ein Werkstoff- bzw. Herstellungsfehler vorliegt, werden schadhafte Teile kostenlos ersetzt.

Verschleißteile werden im Allgemeinen während der normalen Garantiezeit nicht gedeckt, es sei denn, die Artikel benötigen eine Reparatur oder einen Ersatz, die als eine eindeutige direkte Folge eines Herstellungs- oder Materialfehler notwendig wurden.

Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designveränderungen vorbehalten.

Ausschluss der Gewährleistung

Verschleißteile sind (unter anderem): GummifüÙe

Teile des Produkts



DSF 130

1. Rückenlehne
2. Armlehne
3. Arretierung für Sitzplatte
4. Verstellbarer Fuß
5. Sitzplatte

Indikation

INDIKATION:

Unmöglichkeit des sicheren Standes in der Dusche aufgrund Schädigung der Funktion der unteren Extremität mit eingeschränkter oder aufgehobener Beweglichkeit und Muskelkraft und/oder Schädigung der vestibulären Funktionen oder Fallneigung anderer Genese bei gleichzeitig ausreichend stabiler Rumpfhaltung zum Sitzen und ausreichender Restfunktionen der oberen Extremitäten.

Lieferumfang

1 x	Duschstuhl
1 x	Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam.
- Vor dem Gebrauch sind alle Bauteile auf Schäden und festen Sitz zu prüfen. Produkt bei Defekt nicht verwenden!
- Beim Hinsetzen, Aufstehen und beim Einrasten der Sitzplatte können Bekleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Vorsicht - Abrutsch-/Absturzgefahr!
- Die Kippsicherheit des Produkts ist deutlich geringer als bei normalen Stühlen, vermeiden Sie deshalb seitliches hinausbeugen – Kippgefahr!
- Setzen Sie sich stets in die Mitte der Sitzfläche bzw. ganz nach hinten an die Rückenlehne und nicht auf den Rand – Kipp- bzw. Abrutschgefahr!
- Das Produkt darf nicht dauerhaft Temperaturen über 60° C ausgesetzt werden (z. B. Verwendung in Sauna etc.).
- Beachten Sie das zugelassene Maximalgewicht des Benutzers. Diese Angabe finden Sie in den technischen Daten in dieser Bedienungsanleitung sowie auf dem Typenschild.

Montage


Der Duschstuhl ist vormontiert, lediglich die 4 Stellfüße müssen montiert werden (siehe nächstes Kapitel).

Entfalten Sie ihn wie abgebildet und stellen Sie die Sitzfläche nach oben. Schwenken Sie beide Seitenteile nach vorne und dann die Sitzplatte nach unten bis sie auf den Halteklammern aufliegt (**Bild 1+2**).



Drücken Sie nun die Sitzplatte kräftig nach unten bis sie hörbar in den Halteklammern links und rechts einrastet (**Bild 3**).


Prüfen Sie den korrekten Sitz der Sitzplatte in den Halteklammern (**Bild 4**).

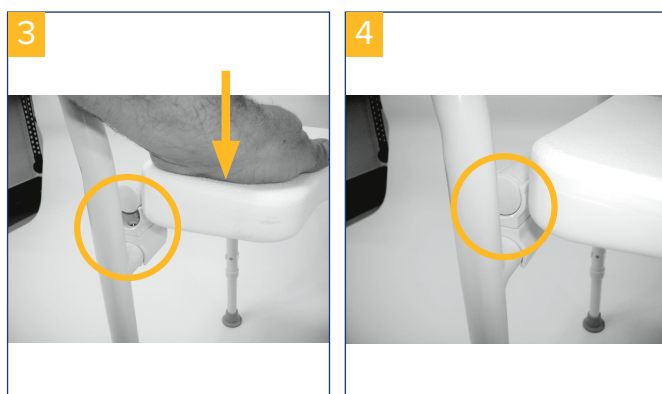

Höheneinstellung der Füße

Vor Benutzung das Produkt auf die gewünschte Höhe einstellen (**Bild 5**). Für die Höhenverstellung der Beine:

Knopf drücken (1) und gleichzeitig das Bein herausziehen bzw. einschieben bis der Knopf in der gewünschten Position einrastet (2). Versichern Sie sich, dass der Druckknopf richtig eingerastet ist.

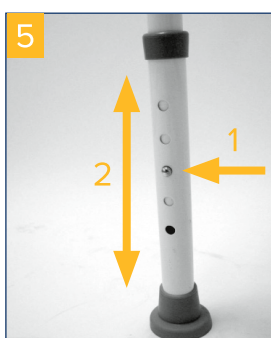

Stellen Sie sicher, dass alle vier Beine auf die gleiche Höhe eingestellt sind.

Reinigung | Wartung

- Von Hand mit einem feuchten Tuch regelmäßig reinigen!
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!
- Keine Scheuermittel verwenden!
- Keine hochdosierten Chlor- und Essigreiniger verwenden!
- Zur Desinfektion kann ein Sprühdeseinfektionsmittel verwendet werden, z.B. Descosept AF oder Bacillol AF
- Schrauben regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen!
- Das Produkt darf nicht dauerhaft Temperaturen über 60 °C ausgesetzt werden (z.B. Verwendung in Sauna etc.)
- Bei Defekten suchen Sie Ihren Fachhändler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben, auf.

Technische Daten

Produkt	DSF 130
Artikelnummer	550200100
HMV-Nr.	04.40.03.2021
Gesamttiefe	56 cm - 58 cm
Gesamtbreite	53 cm
Gesamthöhe	90 - 100 cm
Rückenlehnenhöhe	46 cm - 48 cm
Sitz (B/T/H)	41 cm / 41 cm / 52 cm
Sitzhöhenverstellstufen	5
Gewicht	3,8 kg
Max. Belastung	130 kg
Material Rahmen	Geschweißtes Stahlrohr, Pulverbeschichtet
Material Sitzbrille / Armauflagen	PP (Polypropylen) / PU (Polyurethan)

Table of contents

Preface.....	7
Declaration of conformity.....	7
Service life.....	7
Disposal.....	7
Identification plate.....	7
Reuse.....	7
Warranty.....	7
Indication.....	8
Scope of delivery.....	8
Safety instructions.....	8
Assembly.....	9
Height adjustment of the feet.....	9
Cleaning Maintenance.....	9
Technical data.....	9

Preface

Thank you for choosing a product from Drive DeVilbiss.

You will not be disappointed by the design, functionality and quality of this product.

Please read these operating instructions carefully prior to initial use. They contain important safety information and valuable tips for the proper use and care. If you have questions or need additional information, contact your Drive DeVilbiss specialist dealer who supplied your product.

These operating instructions contain all of the important information for adjustment and operation. The most current operating instructions are available as a PDF online or can be requested from customer service.

Enlarged formats for visually impaired persons can be displayed. Blind patients must be instructed by their attendant. Repairs as well as some adjustments require special technical training and must therefore be made by the medical supplies dealer.

Declaration of conformity

For the product described, DRIVE MEDICAL GMBH & Co.KG declares compliance according to the medical device regulation (EU) 2017/745.

Service life

Our company assumes a service life of five years for this product as long as the product is used as intended and all maintenance and service requirements are observed.


This service life may be significantly exceeded if the product is carefully handled, repaired, maintained and used and there are no technical limits based on the further development of science and technology.

The service life may also be significantly shortened through extreme and improper use, however. Determination of the service life by our company does not represent any additional guarantee.

Disposal

If you no longer need the product, please contact your specialist dealer or bring the product to your local disposal center.

Identification plate

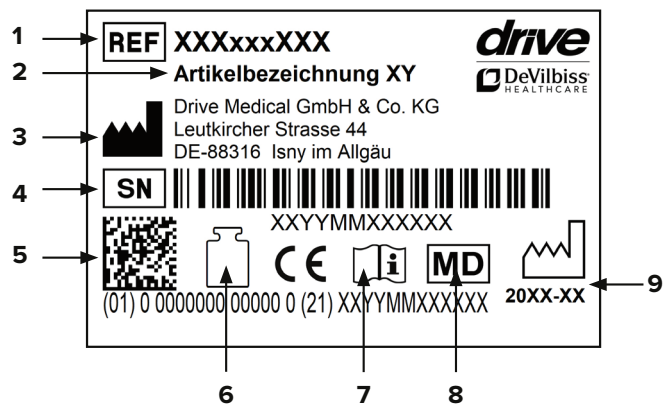

1 Article number | 2 Article name | 3 Manufacturer | 4 Serial number | 5 UDI code | 6 Max. load | 7 Follow the instructions for use | 8 Medical device | 9 Production date (year/month)

Reuse

This product can be reused. Please note that all technical documents needed for safe handling must also be given to the new user.

The product must be checked by the specialist dealer, cleaned, and restored to optimum condition.

Always follow the manufacturer's instructions during preparation; these are made available on request.

Accessories are available at www.drivedevilbiss.de or from your specialist dealer.

Warranty

The warranty period for the product supplied by us is 24 months from the date of purchase. Defective parts will be replaced free of charge if it can be shown that there is a defect in materials or manufacturing.

Parts subject to wear are generally not covered during the normal guarantee period unless the parts need repair or replacement which became necessary as a clear, direct consequence of a manufacturing or material error.

We reserve the right of error and modifications on the basis of technical improvements and changes in design.

Exclusion of warranty

Parts subject to wear include (among others): rubber feet

Parts of the product



DSF 130

1. **Backrest**
2. **Armrest**
3. **Lock for seat section**
4. **Adjustable foot**
5. **Seat section**

Indication

INDICATION:

Impossibility to securely stand in the shower due to impaired function of the lower extremity with limited or absent mobility and muscle strength and/or impaired vestibular function or tendency to fall due to other etiology with simultaneously adequate stable torso position for sitting and sufficient residual functions of the upper extremities.

Scope of delivery

1 x	Shower chair
1 x	Instructions for use

Safety instructions

- Read these instructions for use carefully.
- All components should be checked for damage and a secure fit prior to use. Do not use product if there are any defects!
- Clothing or body parts can be pinched when sitting down or getting up and when locking the seat section into place.
- Caution – risk of slipping/falling!
- The product is significantly less stable than regular chairs, therefore avoid leaning to the side – risk of tipping!
- Always sit in the middle of the seat and all the way back against the backrest and not on the edge – risk of tipping and slipping!
- The product should not be exposed to temperatures above 60 °C for long periods of time (for example, use in a sauna, etc.).
- Take note of the permitted maximum weight of the user. This information can be found in the technical data in these instructions for use as well as on the identification plate.

Assembly


The shower chair is preassembled; only the 4 adjustable feet need to be assembled (see next section).

Unfold it as shown and lift the seat section upwards. Swing both side parts forwards and then bring the seat section down until it rests on the retaining clips (**pic. 1+2**).



Now push the seat section down firmly until it audibly clicks into place in the left and right retaining clips (**pic. 3**).


Check the proper position of the seat section in the retaining clips (**pic. 4**).

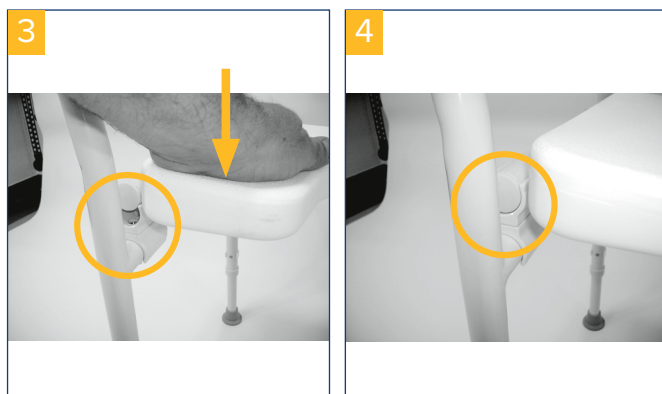

Height adjustment of the feet

Before using the product, adjust it to the desired height (**pic. 5**). To adjust the height of the legs:

Press button (1) and at the same time, pull the leg out or push it in until the button clicks into place in the desired position (2). Ensure that the pushbutton has correctly clicked into place.

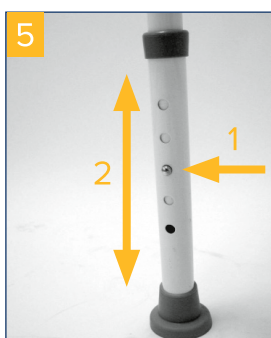

Ensure that all four legs are adjusted to the same height.

Cleaning | Maintenance

- Clean regularly with a moist cloth!
- Do not use any aggressive cleaning agents!
- Do not use abrasive cleaners!
- Do not use any high-dose chlorine and vinegar-based cleaners!
- To disinfect, a spray disinfectant can be used such as Descosept AF or Bacillol AF.
- Check the screws regularly and tighten, if necessary.
- The product should not be exposed to temperatures above 60 °C for long periods of time (for example, use in a sauna, etc.).
- In the event of defects, contact your specialist dealer from whom you purchased this product.

Technical data

Product	DSF 130
Article number	550200100
HMV (medical aids register) no	04.40.03.2021
Overall depth	56 cm - 58 cm
Overall width	53 cm
Overall height	90 - 100 cm
Height of backrest	46 cm - 48 cm
Seat (W/D/H)	41 cm / 41 cm / 52 cm
Seat adjustment settings	5
Weight	3.8 kg
Max. load	130 kg
Frame material	Welded steel tubing, powder-coated
Seat / armrest cover material	PP (polypropylene) / PU (polyurethane)

Sommaire

Avant-propos.....	11
Déclaration de conformité.....	11
Durée de vie.....	11
Élimination.....	11
Plaque signalétique.....	11
Recyclage.....	11
Garantie.....	11
Pièces du produit.....	12
Indication.....	12
Contenu de la livraison.....	12
Consignes de sécurité.....	12
Montage.....	13
Réglage de la hauteur des pieds.....	13
Nettoyage maintenance.....	13
Caractéristiques techniques.....	13

Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de Drive DeVilbiss.

Le design, la fonctionnalité et la qualité de ce produit sauront vous apporter pleine satisfaction.

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Vous y trouverez des consignes de sécurité importantes et de précieux conseils pour son utilisation et son entretien corrects. Pour toute question ou information complémentaire, adressez-vous au distributeur Drive DeVilbiss qui vous a livré ce produit.

Le présent mode d'emploi contient toutes les instructions nécessaires au réglage et à l'utilisation du produit. La version la plus récente du mode d'emploi peut être consultée en ligne au format PDF et téléchargée ou demandée auprès du service client.

Elle existe en caractères grand format pour malvoyants. Les non-voyants doivent être initiés à l'utilisation du produit accompagnés d'un auxiliaire. Les réparations ainsi que certains réglages requièrent des compétences techniques spéciales et doivent donc obligatoirement être effectués par un distributeur de matériel médical qualifié.

Déclaration de conformité

DRIVE MEDICAL GMBH & Co.KG déclare que le produit est conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Durée de vie

Pour ce produit, notre entreprise table sur une durée de vie de cinq ans, dans la mesure où il est utilisé conformément à l'usage pour lequel il est prévu et où toutes les indications relatives à la maintenance et au service après-vente sont respectées.


Cette durée de vie peut même être sensiblement prolongée lorsque le produit est traité, entretenu et utilisé avec soin et qu'aucune limite technique ne résulte des évolutions scientifiques et techniques.

La durée de vie peut par contre être fortement raccourcie si le produit est soumis à des sollicitations extrêmes et s'il n'est pas correctement utilisé. La détermination de la durée de vie par notre entreprise ne constitue en aucun cas une garantie supplémentaire.

Élimination

Si vous n'avez plus besoin du produit, contactez s'il vous plaît votre distributeur ou apportez le produit à la déchetterie près de chez vous.

Plaque signalétique

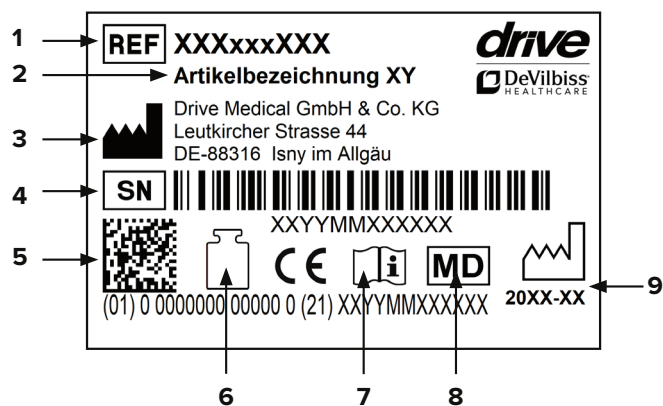

1 Référence | 2 Désignation | 3 Fabricant | 4 N° de série | 5 Code UDI | 6 Charge maximale | 7 Se conformer au mode d'emploi | 8 Dispositif médical | 9 Date de fabrication (année/mois)

Recyclage

Ce produit est recyclable.

Veiller à ce que tous les documents techniques nécessaires à une utilisation sûre du produit soient également remis au nouvel utilisateur.

Le produit doit être contrôlé, nettoyé et remis en parfait état par un distributeur en vue de sa réutilisation.

Pour son retraitement, il convient de suivre les instructions du fabricant (disponibles sur demande).

Vous trouverez les accessoires disponibles sur le site www.drivedevilbiss.de ou chez votre distributeur.

Garantie

Le produit livré par nous est garanti 24 mois à compter de la date de l'achat. Les pièces défectueuses seront remplacées gratuitement s'il a été démontré qu'elles présentent un défaut de matériau ou de fabrication.

Les pièces d'usure ne sont normalement pas couvertes par la garantie habituelle, excepté si elles nécessitent des réparations ou un remplacement qui sont clairement la conséquence directe d'un défaut de matériau ou de fabrication.

Sous réserve d'erreurs et de modifications dues à des améliorations techniques ou à des modifications de design.

Exclusion de la garantie

Pièces d'usure (entre autres) :
embouts de pieds en caoutchouc

Pièces du produit



DSF 130

1. **Dossier**
2. **Accoudoir**
3. **Crochet de blocage de l'assise**
4. **Pied réglable**
5. **Assise**

Indication

INDICATION :

Incapacité de se tenir debout en position stable dans la douche due à une lésion fonctionnelle des membres inférieurs avec mobilité et tonus musculaires réduits ou nuls et/ou troubles vestibulaires ou tendance à la chute d'autre origine, la stabilité posturale du tronc étant suffisante pour rester assis et les capacités fonctionnelles des membres supérieurs restant suffisantes.

Contenu de la livraison

1 x	Chaise de douche
1 x	Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Lire attentivement ce mode d'emploi.
- Avant d'utiliser le produit, vérifier tous ses éléments pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés et ne bougent pas. Ne pas utiliser le produit s'il est défectueux.
- Des vêtements ou des parties du corps peuvent se coincer lorsque l'utilisateur s'assied, se lève ou encliquète l'assise.
- Attention – Risque de dérapage / de chute !
- La chaise de douche est nettement moins stable que les chaises ordinaires. Vous devez donc éviter de vous pencher sur les côtés – la chaise risque sinon de basculer.
- Toujours s'asseoir au milieu de l'assise ou tout au fond, avec le dos contre le dossier. Ne pas s'asseoir sur le bord – la chaise risque de basculer et vous pouvez tomber.
- Le produit ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 60 °C pendant une durée prolongée (p. ex., ne pas l'utiliser dans une cabine de sauna, etc.).
- Respecter le poids maximal autorisé pour l'utilisateur. Il est indiqué dans ce mode d'emploi à la rubrique des caractéristiques techniques et sur la plaque signalétique.

Montage


La chaise de douche est pré-assemblée. Il ne reste plus qu'à monter les 4 pieds (voir chapitre suivant).

Déplier la chaise comme indiqué sur la photo et redresser l'assise. Écarter les deux côtés puis rabattre l'assise jusqu'à ce qu'elle touche les deux crochets (**fig. 1+2**).



Appuyer sur l'assise d'un coup sec pour l'emboîter dans les crochets à gauche et à droite (on doit entendre un « clic ») (**fig. 3**).


S'assurer que l'assise est bien enfoncée dans les crochets (**fig. 4**).

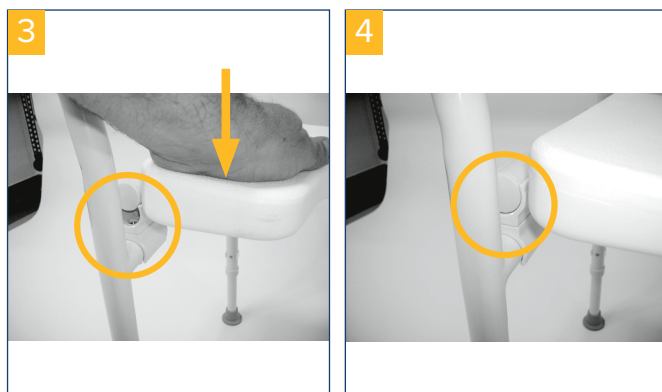

Réglage de la hauteur des pieds

Avant utilisation, régler le produit à la hauteur souhaitée (**fig. 5**). Réglage de la hauteur des pieds :

appuyer sur le bouton (1) tout en sortant le pied du tube ou en le rentrant jusqu'à ce que le bouton s'arrête dans la position souhaitée (2). S'assurer que le bouton est correctement verrouillé.

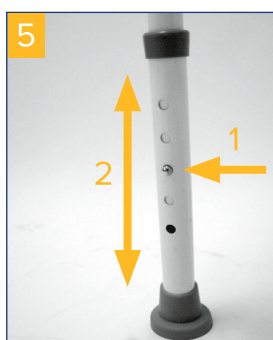

S'assurer que les quatre pieds sont réglés à la même hauteur.

Nettoyage | maintenance

- Nettoyer régulièrement le produit à la main avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergent chloré ni de vinaigre ménager fortement concentrés.
- Pour la désinfection, on peut utiliser un désinfectant en spray, par exemple Descosept AF ou Bacillol AF.
- Vérifier les vis régulièrement et les resserrer le cas échéant.
- Le produit ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 60 °C pendant une durée prolongée (p. ex., ne pas l'utiliser dans une cabine de sauna, etc.).
- Si le produit est défectueux, contacter le distributeur qui vous l'a livré.

Caractéristiques techniques

Produit	DSF 130
Référence	550200100
N° HMV (catalogue des moyens auxiliaires)	04.40.03.2021
Profondeur totale	56 cm – 58 cm
Largeur totale	53 cm
Hauteur totale	90 – 100 cm
Hauteur du dossier	46 cm – 48 cm
Assise (l/p/h)	41 cm / 41 cm / 52 cm
Niveaux de réglage de la hauteur de l'assise	5
Poids	3,8 kg
Charge maximale	130 kg
Matériau du cadre	Tube en acier soudé revêtu poudre
Matériau Lunette / accoudoirs	Pp (polypropylène) / Pu (polyuréthane)

Inhoudsopgave

Voorwoord	15
Verklaring van overeenstemming	15
Levensduur	15
Verwijdering	15
Typeplaatje	15
Hergebruik.....	15
Garantie	15
Onderdelen van het product.....	16
Indicatie	16
Geleverd product.....	16
Veiligheidsinstructies.....	16
Montage	17
Hoogte-instelling van de voetjes	17
Reiniging onderhoud	17
Technische gegevens.....	17

Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van het merk Drive DeVilbiss.

Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van dit product zullen u niet teleurstellen.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste gebruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verantwoord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw Drive DeVilbiss-speciaalzaak die u het product heeft geleverd.

Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen of bij de klantenservice bestellen.

Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en enkele instellingen is een speciale technische opleiding nodig, zodat deze door de winkel in medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co.KG verklaart dat het beschreven product voldoet aan de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Levensduur

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een levensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd.


Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wanneer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen volgens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet worden overschreden.

Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de levensduur echter ook sterk worden verkort. De aanduiding van de levensduur door onze onderneming vormt geen aanvullende garantie.

Verwijdering

Mocht u het product niet meer nodig hebben, neem dan contact op met uw speciaalzaak of breng het product naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt.

Typeplaatje

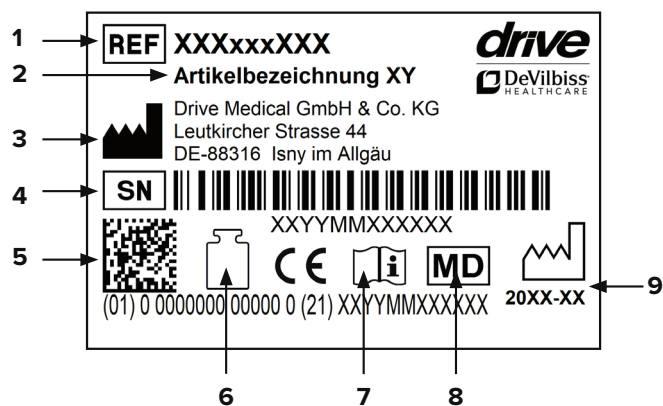

1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Productiedatum (jaar/maand)

Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de nieuwe gebruiker.

Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat gebracht worden.

Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie van de producent in acht te worden genomen. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Verkrijgbare accessoires vindt u op www.drivedevilbiss.de of bij uw speciaalzaak.

Garantie

Op het product dat wij leveren, wordt 24 maanden garantie vanaf de koopdatum verleend. Indien aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt, worden beschadigde onderdelen kosteloos vervangen.

Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout.

Eventuele fouten en wijzigingen op grond van technische verbeteringen en veranderingen in design voorbehouden.

Uitsluiting van garantie

Slijtageonderdelen zijn (onder andere): rubberen voetjes

Onderdelen van het product



DSF 130

1. **Rugleuning**
2. **ArMLEuning**
3. **Vergrendeling voor zitting**
4. **Verstelbare voet**
5. **Zitting**

Indicatie

INDICATIE:

Onmogelijkheid om veilig te staan in de douche vanwege aangetaste functie van de onderste extremiteiten met beperkte of ontbrekende mobiliteit en spierkracht en/of aantasting van de vestibulaire functies of neiging tot vallen met andere oorzaak bij gelijktijdig voldoende stabiele romphouding om te zitten en voldoende restfuncties van de bovenste extremiteiten.

Geleverd product

1 x	Douchestoel
1 x	Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig.
- Controleer vóór ingebruikname of alle onderdelen stevig vastzitten en niet zijn beschadigd. Gebruik het product niet als het defect is!
- Bij het gaan zitten, het opstaan en het vergrendelen van de zitting kunnen kleding en lichaamsdelen bekneld raken.
- Voorzichtig - gevaar voor uitglijden/vallen!
- Het product valt aanzienlijk gemakkelijker om dan een normale stoel. Vermijd daarom zijwaarts naar buiten leunen – dit leidt tot gevaar voor omvallen!
- Ga steeds in het midden van de zitting resp. helemaal naar achter tegen de rugleuning aan zitten, en niet op de rand – dit leidt tot gevaar voor omvallen en wegglijden!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60 °C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna, enz.).
- Let op het toegestane maximale gewicht van de gebruiker. Deze informatie vindt u in de technische gegevens in deze bedieningshandleiding en op het typeplaatje.

Montage


De douchestoel wordt voorgemonteerd geleverd. U hoeft alleen de 4 stelvoetjes te monteren (zie volgende hoofdstuk).

Vouw de stoel open zoals afgebeeld en plaats deze met de zitting naar boven. Draai de beide zijpanelen naar voren en dan de zitting omlaag totdat deze op de bevestigingsklemmen steunt (afb. 1+2).



Druk de zitting vervolgens krachtig omlaag totdat deze hoorbaar in de bevestigingsklemmen links en rechts vastklikt (afb. 3).


Controleer of de zitting goed vastzit in de bevestigingsklemmen (afb. 4).

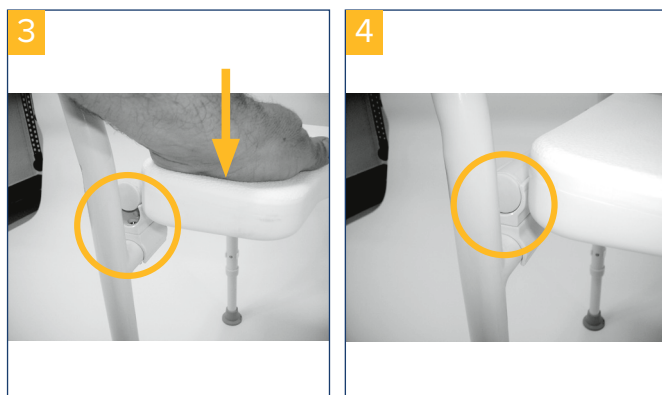

Hoogte-instelling van de voetjes

Stel de gewenste hoogte in voordat u het product gebruikt (afb. 5). Verstel de poten als volgt in hoogte:

Druk op de knop (1) en trek de poot tegelijkertijd naar buiten of schuif deze in tot de knop vastklikt in de gewenste positie (2). Controleer of de drukknop goed is vergrendeld.

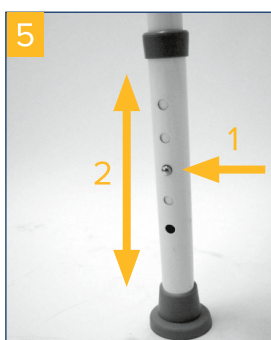

Controleer of alle vier stoelpoten op dezelfde hoogte zijn ingesteld.

Reiniging | onderhoud

- Reinig dit product regelmatig met de hand met een vochtige doek!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chloor- en azijngehalte!
- Voor desinfectie kan een desinfecterende spray worden gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol AF.
- Controleer de schroeven regelmatig en draai deze indien nodig aan!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60 °C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna, enz.).
- Neem bij defecten contact op met de specialzaak waar u dit product hebt gekocht.

Technische gegevens

Product	DSF 130
Artikelnummer	550200100
HMV-nr.	04.40.03.2021
Totale diepte	56 cm - 58 cm
Totale breedte	53 cm
Totale hoogte	90 - 100 cm
Rugleuninghoogte	46 cm - 48 cm
Zitting (B/D/H)	41 cm / 41 cm / 52 cm
Verstellniveaus zithoogte	5
Gewicht	3,8 kg
Max. belasting	130 kg
Framemateriaal	Gelaste stalen buizen met poedercoating
Materiaal toiletbril / armsteunen	PP (polypropyleen) / PU (polyurethaan)

Indice

Introduzione.....	19
Dichiarazione di conformità	19
Durata.....	19
Smaltimento.....	19
Targhetta tipologica	19
Riutilizzo.....	19
Garanzia.....	19
Parti del prodotto.....	20
Indicazioni	20
Materiale in dotazione	20
Avvertenze di sicurezza	20
Montaggio.....	21
Regolazione dell'altezza dei piedi.....	21
Pulizia Manutenzione	21
Dati tecnici	21

Introduzione

La ringraziamo di avere scelto un prodotto Drive DeVilbiss.

Il design, la funzionalità e la qualità di questo prodotto non La deluderanno.

Legga attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzarlo per la prima volta. Riceverà così importanti informazioni sulla sicurezza e preziosi consigli sull'uso e la manutenzione corretti. Se ha qualche domanda da porre o ha bisogno di maggiori informazioni, non esiti a rivolgersi al rivenditore Drive DeVilbiss che Le ha fornito il prodotto.

Le presenti istruzioni per l'uso contengono tutte le avvertenze importanti per l'adattamento e l'uso. Le istruzioni per l'uso sono reperibili come PDF online oppure possono essere richieste al servizio di assistenza.

Possono anche essere reperiti formati ingranditi per le persone con ridotta capacità visiva. I non vedenti devono essere istruiti dal loro accompagnatore. Le riparazioni, come pure alcune regolazioni, richiedono una speciale formazione tecnica e pertanto devono essere eseguite da specialisti del settore sanitario.

Dichiarazione di conformità

DRIVE MEDICAL GMBH & Co.KG dichiara la conformità del prodotto descritto in base al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745.

Durata

La nostra azienda prevede per questo prodotto una durata utile di cinque anni, purché sia impiegato conformemente alle norme d'uso e siano rispettate tutte le regole prescritte per la manutenzione e l'assistenza.

Questa durata può essere superata di molto se il prodotto è trattato, sottoposto a manutenzione, curato e utilizzato con attenzione e se non emergono limiti tecnici dovuti agli ulteriori sviluppi tecnico-scientifici.

La durata utile d'altro canto può anche ridursi notevolmente a causa di un utilizzo estremo e non conforme. La durata utile stabilita dalla nostra azienda non rappresenta una garanzia ulteriore.

Smaltimento

Qualora non avesse più bisogno del prodotto, contatti il Suo rivenditore oppure conferisca il prodotto al centro di smaltimento locale.

Targhetta tipologica



1 Numero articolo | 2 Descrizione articolo | 3 Produttore | 4 Numero di serie | 5 Codice UDI | 6 Portata max. | 7 Rispettare le istruzioni per l'uso | 8 Dispositivo medico | 9 Data di produzione (annolmese)

Riutilizzo

Questo prodotto è idoneo per il riutilizzo.

Tenere presente che anche tutta la documentazione tecnica necessaria per la sicurezza deve essere consegnata al nuovo utilizzatore.

Il prodotto deve essere controllato, pulito e riportato in perfette condizioni per il riutilizzo a cura del rivenditore.

Per il ricondizionamento tenere presenti le regole prescritte dal fabbricante, che possono essere messe a disposizione su richiesta.

Troverà gli accessori disponibili sotto l'indirizzo www.drivedevilbiss.de o presso il Suo rivenditore.

Garanzia

Per il prodotto fornito da noi la durata della garanzia è di 24 mesi dalla data d'acquisto. Qualora sia dimostrata la presenza di difetti di materiale o fabbricazione, le parti difettose vengono sostituite gratuitamente.

Le parti soggette a usura di norma non sono coperte durante il normale periodo di garanzia, a meno che l'articolo non richieda riparazioni o sostituzioni rese necessarie per chiara conseguenza diretta di un difetto di fabbricazione o di materiale.

Con riserva di errori e variazioni causate da migliorie tecniche e modifiche del design.

Esclusione della garanzia

Sono parti soggette a usura (fra le altre):
piedini in gomma

Parti del prodotto



DSF 130

1. Schienale
2. Bracciolo
3. Blocco per seduta
4. Piede regolabile
5. Seduta

Indicazioni

INDICAZIONI:

Impossibilità di assumere una posizione eretta stabile nella doccia a causa del danno funzionale delle estremità inferiori, con limitata o assente mobilità e forza muscolare e/o danno delle funzioni vestibolari o tendenza alla caduta di altra genesi, in presenza di una stabilità del tronco sufficiente per sedersi e di sufficienti funzioni residue delle estremità superiori.

Materiale in dotazione

1	Sedia da doccia
1	Istruzioni per l'uso

Avvertenze di sicurezza

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso.
- Prima dell'uso controllare che tutti gli elementi siano privi di danni e stabili. Non utilizzare il prodotto se difettoso!
- Quando ci si siede, ci si alza e si blocca la seduta possono restarvi impigliate parti del corpo o degli indumenti.
- Attenzione - Pericolo di scivolare/cadere!
- La stabilità del prodotto è nettamente inferiore a quella di una sedia normale, evitare quindi di sporgersi lateralmente – pericolo di ribaltamento!
- Posizionarsi sempre al centro della seduta o poggiarsi bene con la schiena contro la spalliera e non sul bordo – pericolo di ribaltarsi o di scivolare!
- Il prodotto non deve essere sottoposto a lungo a temperature superiori a 60 °C (ad es. nella sauna, ecc.).
- Rispettare il peso massimo permesso dell'utilizzatore. Questi dati sono riportati sia nei dati tecnici delle presenti istruzioni che sulla targhetta tipologica.

Montaggio


La sedia per doccia è premontata, mancano solo da montare i 4 piedi regolabili (vedere prossimo capitolo).

Aprire la sedia come da illustrazione ripiegando la seduta verso l'alto. Ruotare i due fianchi in avanti, quindi abbassare la seduta fino a farla poggiare sui fermi di chiusura (fig. 1+2).



Ora spingere in basso con forza la seduta fino a sentire chiaramente lo scatto dei fermi di chiusura a destra e a sinistra (fig. 3).


Verificare che la seduta sia correttamente agganciata nei fermi di chiusura (fig. 4).

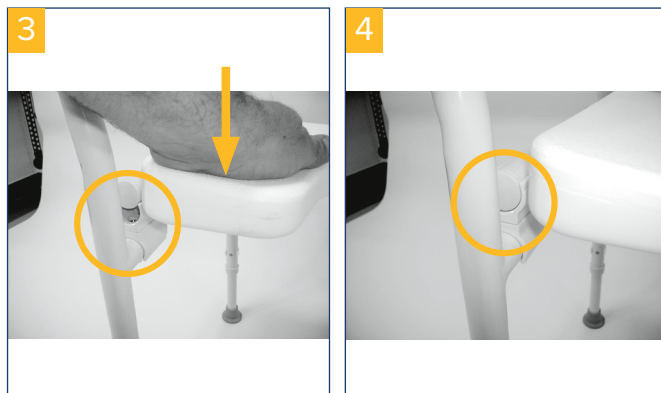

Regolazione dell'altezza dei piedi

Prima di usare il prodotto, regolarlo all'altezza desiderata (fig. 5). Per regolare l'altezza delle gambe:

Premere il pulsante (1) e al tempo stesso estrarre o far rientrare la gamba fino a che il pulsante non si incastri nella posizione desiderata (2). Verificare che il pulsante sia correttamente scattato in posizione.

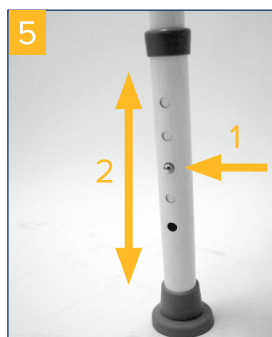

Accertarsi che tutte le quattro gambe siano regolate sulla stessa altezza.

Pulizia | Manutenzione

- Pulire regolarmente a mano con un panno umido!
- Non impiegare detergenti aggressivi!
- Non utilizzare per la pulizia prodotti abrasivi!
- Non utilizzare detergenti ad alto tenore di cloro e aceto!
- Per la disinfezione si può impiegare uno spray disinfettante, quale ad es. Descosept AF o Bacillol AF
- Controllare regolarmente le viti e riprenderne eventualmente il serraggio!
- Il prodotto non deve essere sottoposto a lungo a temperature superiori a 60 °C (ad es. nella sauna, ecc.)
- In caso di difetti, rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Dati tecnici

Prodotto	DSF 130
Numero articolo	550200100
N° HMV	04.40.03.2021
Profondità d'ingombro	56 cm - 58 cm
Larghezza ingombro	53 cm
Altezza ingombro	90 - 100 cm
Altezza spalliera	46 cm - 48 cm
Seduta (L/P/A)	41 cm / 41 cm / 52 cm
Gradi di regolazione altezza seduta	5
Peso	3,8 kg
Portata max.	130 kg
Materiale telaio	Tubo d'acciaio saldato, verniciato a polvere
Materiale seduta / appoggi braccia	PP (polipropilene) / PU (poliuretano)

Ihr Fachhändler:



Irrtum und Änderungen vorbehalten
Stand: 23.04.2020
Version: MDR-1.0

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu • Germany
T +49 7562 9724 0 • **F** +49 7562 9724 25
www.drivemedical.de • info@drivemedical.de