

## Zeef buizen vervangings instructies.

1. Zet het toestel uit en ontkoppel deze van de wissel of gelijk stroom bron indien deze daar op aangesloten is.
2. Haal het toestel uit de draagtas.
3. Haal de batterijen uit het toestel
4. Druk op de 4 knoppen aan de bovenzijde van het toestel om de afdek kap te verwijderen zoals getoond in Fig. 9.
5. Gebruik het met de zeef-buis meegeleverde gereedschap om de zeef-buis al draaiende tegen de wijzers van de klok in, met 3 of 4 slagen los te draaien terwijl deze vanaf de onderkant naar boven gedrukt worden.
6. Herhaal bovenstaande voor de andere zeef-buis.
7. Verwijder de verpakking van de vervangings zeef-buizen. Nadat de bescherm stop verwijderd is dient de zeef-buis direct geplaatst te worden. Let op: Laat de vervangings zeef-buis niet onbeheerd rondslingeren.
8. Installeer de vervangings zeef-buis met de draad naar boven zoals getoond in Fig. 10.
9. Draai de zeef handvast.
10. Gebruik het meegeleverde gereedschap om dit te bewerkstelligen.



Fig. 9







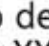





Fig. 10

### Let op: Draai de zeef-buizen niet te hard aan!

11. Herhaal deze stappen om de andere zeef-buizen ook te vervangen.
12. Plaats de afdek kap terug op het toestel zodat alle vier de druk-knoppen in de gaatjes klikken.
13. Plaats de batterijen terug in het daarvoor bestemde compartiment.
14. Sluit het toestel aan op de wissel of gelijk stroom bron.

### ZET HET TOESTEL NIET AAN!

15. Druk tegelijk op „alarm geluid”  en „batterij”  toets totdat op het display „lektest” verschijnt.
  - a. Gedurende dit proces worden rechts van de „lektest” cijfers getoond.
  - b. Als de test klaar is, zal het display „Test klaar” of „Test gefaald” aangeven.
    - i „Test klaar” druk op de batterij knop  om het programma te verlaten en ga verder naar stap 16.
    - ii „Test gefaald” druk op de batterij knop  t om het programma te verlaten en herhaal de stappen 4-15.
16. Wanneer de lektest in orde bevonden is moet de uren teller op het toestel gereset worden.
  - a. Start uw Zen-O™ lite draagbare zuurstof concentrator.
  - b. Druk tegelijk op de  en de  knoppen totdat „Diagnose” is te zien in het display.
  - c. Druk te drukken op de  en  knoppen in het diagnose menu totdat „XXXH zeef” is te zien, waar XXXX het aantal uren van de vorige zeef-buizen.
  - d. Druk op „Alarm geluid uit”  totdat de urenteller „0H zeef” laat zien.
  - e. Druk op de batterij knop  om het diagnose menu te verlaten.
  - f. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.