

EN Instructions for use:

This product can be used on the following appliances: removable dentures, removable orthodontic appliances, anti-bruxism and anti-snoring devices (mandibular advancement devices).

Packaging

Product available in the following tablet box sizes: 12, 20, 32 and 64. The number of tablets contained in this package can be found on the front of the product box.

Precautions for use

For external use only. Discard solution after use. Do not use if allergic to any of the ingredients or to persulfates. Do not put tablet in mouth. Tablet powder may cause eye damage. Do not drink the solution or use as a mouthwash. Rinse appliance well before replacing it in your mouth. Discontinue use and seek medical attention if any irritation, swelling or pain develops following the first or any later use. Consult instructions for use. Store in a dry place. For single use only.



Causes skin irritation. Causes serious eye damage. Keep out of reach of children. Wash hands thoroughly after handling. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Contains Sodium lauryl sulfate; Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate). Contains Potassium persulfate and 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone. May produce an allergic reaction.

Instructions for use

- Rinse your appliance under running water. If necessary, use a toothbrush or denture brush to remove any food debris.
- Place the appliance in a glass of 150 ml of warm water (33°C - 47°C) ensuring that it is fully immersed and immediately place 1 tablet in the water. Soak for a minimum of 15 mins to ensure reduction of the biofilm. Acrylic appliances can be soaked overnight.

NB: If your tablet is broken the efficacy and usage of the product will not be affected (provided the whole tablet is used).

- Remove the appliance from the solution and rinse well under water before replacing it in the mouth. If a taste should remain on your appliance after replacing it in your mouth, place it in warm water for 10 mins.

Recommended usage: Based on clinical testing, we recommend to begin the treatment with a daily use of the tablet for 21 days. This will ensure the reduction of the biofilm to a lower level. You can then adjust the usage based on your needs with a minimum usage of 2 times per week. This product has a proven efficacy against Candida albicans, P. aeruginosa, and S. aureus.

Conditions of the disinfecting activity testing: The bactericidal and yeasticidal tests were performed using 1 tablet in 150ml of lukewarm hard water (at 37°C) soaking for 15 minutes under clean conditions in 80% final concentration/low load level. The virucidal test was performed using 1 tablet in 150ml of hard water (at 20°C) soaking for 15 minutes under clean conditions in 97% final concentration/low load level.

**IT Istruzioni per l'uso:**

Questo prodotto può essere usato sui seguenti apparecchi estraibili: dentiere, apparecchi ortodontici, anti-bruxismo, anti-russamento e di avanzamento mandibolare.

Imballaggio

Prodotto disponibile nei seguenti formati: 12-20-32-64 compresse. Il numero di compresse contenuto in questa confezione è riportato sulla scatola del prodotto.

Precauzioni d'uso

Solo per uso esterno. Eliminare la soluzione dopo l'uso. Non usare se allergici a qualche ingrediente o ai persolfati. Non mettere in bocca la compressa. La compressa può causare danni agli occhi. Non bere la soluzione, non usarla come collutorio. Sciacquare bene l'apparecchio estraibile prima di rimetterlo in bocca. Interrompere l'uso e rivolgersi al medico in caso di irritazione, gonfiore, o dolore che si sviluppa dopo il primo uso o in seguito. Leggere le istruzioni d'uso. Tenere in luogo asciutto. Solo monouso.



Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Contiene Sodium lauryl sulfate; Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate). Contiene Potassium persulfate and 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone. Può provocare una reazione allergica.

Istruzioni per l'uso

- Sciacquare l'apparecchio sotto acqua corrente. Se necessario, utilizzare uno spazzolino da denti o uno spazzolino per protesi per rimuovere eventuali residui di cibo.
 - Collocare l'apparecchio in un bicchiere contenente 150 ml di acqua calda (33°C - 47°C), assicurandosi che sia completamente immerso, quindi aggiungere immediatamente 1 compressa all'acqua. Lasciare in immersione per almeno 15 minuti per garantire un'efficace riduzione del biofilm. Gli apparecchi in acrilico possono rimanere immersi per tutta la notte.
- N.B.:** L'efficacia e l'uso del prodotto non vengono compromessi se la compressa è rotta (a condizione che venga usata l'intera compressa).
- Prelevare l'apparecchio estraibile dalla soluzione e lavarlo accuratamente sotto l'acqua corrente prima di reintrodilo in bocca. Se, una volta reintrodotto in bocca, dovesse avere uno strano sapore, immergere nuovamente in acqua tiepida per 10 minuti.

Posologia raccomandata: In base ai test clinici, si consiglia di cominciare il trattamento usando una compressa una volta al giorno per 21 giorni. Ciò assicura la riduzione al minimo del biofilm. È possibile adattare la posologia in base alle proprie esigenze, prevedendo comunque un utilizzo di almeno 2 volte alla settimana. Questo prodotto ha un'efficacia dimostrata contro patogeni quali Candida albicans, P. aeruginosa e S. aureus.

Condizioni dei test dell'azione disinsettante: I test dell'azione battericida e levurocida sono stati effettuati con 1 compressa in 150 ml di acqua dura tiepida (a 37°C), con tempo di immersione di 15 minuti in condizioni di pulizia, all'80% di concentrazione finale/a basso livello di carica. Il test dell'azione virucida è stato effettuato con 1 compressa in 150 ml di acqua dura (a 20°C), con tempo di immersione di 15 minuti in condizioni di pulizia, al 97% di concentrazione finale/a basso livello di carica.

**ES Instrucciones de uso:**

Este producto puede ser utilizado en: dentaduras removibles, aparatos de ortodoncia removibles, férulas de descarga antibruxismo, férulas antironquidos y dispositivos de avance mandibular.

Embalaje

Producto disponible en los siguientes formatos: 12, 20, 32 y 64 comprimidos. El número de comprimidos contenidos en este estuche lo encontrará en la caja del producto.

Precauciones de uso

Solo para uso externo. Desechar la solución después de su uso. No use los comprimidos si es alérgico a algún ingrediente o a los persulfatos. No introducir el comprimido en la boca. El polvo de los comprimidos puede causar daños en los ojos. No beba la solución ni la use como enjuague bucal. Enjuague bien la dentadura antes de volver a colocársela. Deje de usar los comprimidos y acuda al médico si sufre irritación, hinchazón o dolor después del primer uso o en cualquier uso posterior. Consulte las instrucciones de uso. Conservese en un lugar seco. Producto de un solo uso.



Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar abundantemente con agua. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Contiene Sodium lauryl sulfate; Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate). Contiene Potassium persulfate y 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone. Puede provocar una reacción alérgica.

Instrucciones de uso

- Sciacquare l'apparecchio sotto acqua corrente. Se necessario, utilizzare uno spazzolino da denti o uno spazzolino per protesi per rimuovere eventuali residui di cibo.
 - Collocare l'apparecchio in un bicchiere contenente 150 ml di acqua calda (33°C - 47°C), assicurandosi che sia completamente immerso, quindi aggiungere immediatamente 1 compressa all'acqua. Lasciare in immersione per almeno 15 minuti per garantire un'efficace riduzione del biofilm. Gli apparecchi in acrilico possono rimanere immersi per tutta la notte.
- Nota:** La efficacia y el uso de la pastilla no se verán mermados aunque esté rota (si se usa la pastilla entera).
- Retirar el aparato de la solución y aclarar bien con agua antes de volver a colocarlo en la boca. Si al ponérselo nota algún sabor, dejar en agua templada durante 10 minutos.

Dosis recomendada: Según los ensayos clínicos, recomendamos comenzar el tratamiento con una pastilla clara durante 21 días. De esta forma garantizará la reducción de la biopelícula a un nivel inferior. Despues podrá ajustar su uso según sus necesidades, con un uso mínimo de 2 veces por semana. Este producto es de eficacia probada contra la Candida albicans, la P. aeruginosa, y el S. aureus.

Condiciones del ensayo de actividad desinfectante: Las pruebas bactericidas y levurocidas se realizaron utilizando 1 pastilla en 150 ml de agua dura templada (a 37°C) con tiempo de inmersión de 15 minutos en condiciones de pulizia, al 80% de concentración final/a bajo nivel de carga. La prueba viricida se realizó utilizando 1 pastilla en 150 ml de agua dura (a 20°C), con tiempo de inmersión de 15 minutos en un entorno limpio en una concentración final al 97%/nivel de carga baja.

**DE Gebrauchsanweisung:**

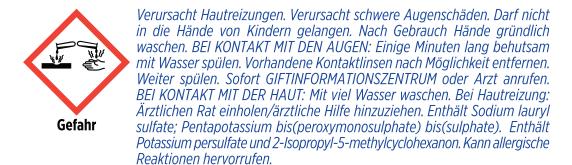
Dieses Produkt kann für folgende Dentalapparaturen verwendet werden: herausnehmbare Prothesen, herausnehmbare Zahnspannen, Anti-Knirscherschienen, Anti-Schnarcherschienen und mandibuläre Protrusionsschienen.

Verpackung

Das Produkt ist in den folgenden Verpackungsgrößen verfügbar: 12, 20, 32 und 64 Tabletten. Die Anzahl der in der Packung enthaltenen Tabletten finden Sie auf der Produktverpackung.

Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung

Nur zur äußerlichen Anwendung. Entsorgen Sie nach dem Gebrauch die Lösung. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie auf eine Zähle oder Persulfate allergisch sind. Nehmen Sie keine Tabletten in den Mund. Das Pulver für die Tabletten kann Augenreizungen auslösen. Die Lösung darf nicht getrunken werden oder als Mundwasser verwendet werden. Vor dem Einsetzen der Prothese, gut abspülen. Sollten Sie nach erstmaliger und wiederholter Anwendung eine Irritation der Schleimhäute, Schwellung, Schmerzen oder Brennen bemerken, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und suchen Sie ärztlich Rat. Gebrauchsanweisung beachten. Trocken aufbewahren. Nur zum einmaligen Gebrauch.

**Gebrauchsanweisung**

- Spülen Sie Ihre Zahnpfthese/Zahnapparatur gründlich unter laufendem Wasser ab. Benutzen Sie, falls erforderlich, eine Zahn- oder Prothesenbürste, um eventuell vorhandene Nahrungsreste zu entfernen.
 - Legen Sie die Zahnpfthese in ein Glas mit ca. 150 ml warmes Wasser (33 °C-47 °C). Achten Sie darauf, dass die Prothese vollständig mit Wasser bedekt ist, und geben Sie sofort eine Tablette in das Wasser. Die Prothese sollte mindestens 15 Minuten in der Lösung liegen, um eine Reduktion des Biofilms sicherzustellen. Apparaturen aus Kunststoff können über Nacht eingeweicht werden.
- Anm.:** Falls die Tablette zerbrochen ist, hat dies keinen Einfluss auf die Anwendung und Wirksamkeit des Produkts (vorausgesetzt, Sie geben alle Bruchstücke, also die gesamte Tablette, in das Glas).
- Die Zahnpfthese aus der Lösung nehmen und gut unter fließendem Wasser abspülen, bevor Sie diese wieder in den Mund einsetzen. Wenn Sie nach dem Einsetzen einen seltamen Geschmack bemerken, legen Sie die Zahnpfthese für 10 Minuten erneut in lauwarmes Wasser.

Empfohlene Dosierung: Auf der Grundlage klinischer Tests empfehlen wir, die Behandlung mit einer täglichen Verwendung einer Tablette für insgesamt 21 Tage zu beginnen. Dadurch wird die Reduktion des Biofilms auf ein niedrigeres Niveau sichergestellt. Danach können Sie die Verwendung an Ihre Bedürfnisse anpassen; Sie sollten jedoch mindestens 2-mal pro Woche die Prothese mit jeweils einer (aufgelösten) Tablette reinigen. Dieses Produkt ist nachweislich gegen die Mikroorganismen Candida albicans, P. aeruginosa und S. aureus wirksam.

Bedingungen für die Prüfung der Desinfektionswirkung: Die bakteriziden und levuroziden Tests wurden mit 1 Tablette in 150 ml lauwarmem, hartem Wasser (bei 37°C) über 15 Minuten unter sauberen Bedingungen in 80%iger Endkonzentration/bei geringer Belastung durchgeführt. Der virizide Test wurde mit 1 Tablette in 150 ml hartem Wasser (bei 20°C) über 15 Minuten unter sauberen Bedingungen in 97%iger Endkonzentration/bei geringer Belastung durchgeführt.

**SV Bruksanvisning:**

Produkt kan användas med denna löstagbar mun apparat: löständer, ortodontisk apparat, anti-bruxism apparat, sömnäpne apparat och mandibula apparat.

Förpackning

Förpackning storlek: 12, 20, 32 och 64 tabletter. Antal av tabletter annonserar i packningen.

Försiktighetsåtgärder för användning

Endast för extern bruk. Förstöra lösningsrätter efter bruk. Använd inte om du är allergisk för produkts beständsdel eller persulfater. Placeråtta inte tabletten i munen. Tablet pulver kontakt med öga förebröllet. Dricka inte och använd inte som munvattnet. Skölja apparat bra innan placering i munnen. Slut användningen och kontakt med doctor om allergisk reaktioner eller vårt osv. dyker upp strax eller senare. Läs den här instruction. Lagras is torrt plats. Produkt är engångs användning.



Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Förras oönskat för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontaktläs genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller Sodium lauryl sulfate; Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate). Innehåller Potassium persulfate och 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone. Kan orsaka en allergisk reaktioner.

Bruksanvisning

- Skölj anordningen under rinnande vatten. Använd vid behov en vanlig tandborste eller protestandborste för att ta bort eventuella matrester.
- Lägg anordningen i ett glas med 1,5 dl ljummet vatten (33 °C-47 °C), kontrollera att den ligger helt nedslänt under vattnet och lägg sedan medelbart 1 tablet i vattnet. Låt anordningen ligga nedslänt i lösningen i minst 15 minuter för att säkerställa att biofilmen reduceras. Proteser/tandställningar och skenor av akryl kan blötläggas över vattnet.
- Ta apparat från vatten och skölj väl under rinnande vatten innan den sätts på platsen igen. Om apparat har tillsvärde smak lägg den i ljumt vatten för 10 minuter.

Rekommenderad dos: Baserat på kliniska undersökningar rekommenderar vi att behandlingen inleds med att tablettorna används dagligen i tre veckor. Det säkerställer att biofilmen reduceras till en lägre nivå. Därefter kan användningen anpassas efter behovet, med en minsta användning på 2 gånger i veckan. Den här produkten har bevisad effektivitet mot Candida albicans, P. aeruginosa och S. aureus.

Testförhållanden för undersökning av desinficerande verkan: Undersökningarna med avseende på tablettornas bakterierödande och svampödande verkan genomfördes på följande sätt: En tabletta löstes i 150 ml ljummet (37°C), hårt vatten; blötläggning i 15 minuter under ren förhållande och med en slutkoncentration/lägsta belastningsnivå på 80%. Undersökningarna med avseende på tablettornas virusdödande verkan genomfördes på följande sätt: En tabletta löstes i 150 ml hårt vatten (20°C); blötläggning i 15 minuter under ren förhållande och med en slutkoncentration/lägsta belastningsnivå på 97%.

