

PATROON MONDMASKER

**Gebruik dit mondmasker niet om in de buurt van een besmette persoon te komen of een besmette persoon te verzorgen.
Gebruik het vooral om te voorkomen dat je zelf anderen besmet!**

Steriliseer het mondmasker minstens één keer per dag door het te wassen op 90°.

Stofadvies

Voor een huisgemaakt mondmasker kun je best het katoen van een keukenhanddoek gebruiken, deze zal het virus het best filteren. Je kunt ook een katoenen T-shirt of antibacteriële kussensloop gebruiken. Als extra filtermateriaal kun je er een stukje stofzuigerzak of een papieren zakdoek in steken.



Benodigheden

- Stof (bv. van een keukenhanddoek), liefst in 2 verschillende kleuren zodat je de buiten- en de binnenkant kunt herkennen.
- 200 cm lint
- Naaigaren
- Stofschaar
- Naaimachine
- Filtermateriaal van 17 x 13 cm (bv. papieren zakdoek of stukje van een stofzuigerzak)



Patroondelen

A buitenpand: 1x knippen
B binnenpand: 1x knippen

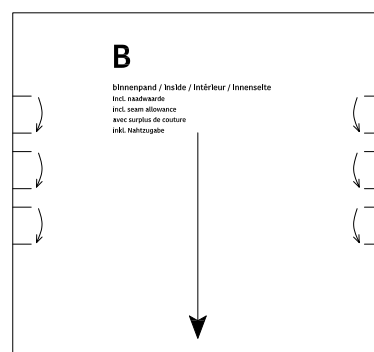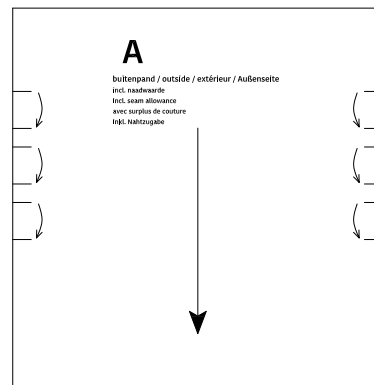


Voorbereiding

Print de patroondelen A en B af op ware grootte. Zet je printerinstellingen op 100% en meet na het printen of het controlevierkant effectief 5 x 5 cm bedraagt.


Knip de patroondelen uit, speld ze op de stof en knip ze uit de stof. Geef aan elk merkteken dat op het patroon staat een knipje in de stof. Dit is een aanduiding zodat je straks weet waar je moet vouwen.

Knip het lint van 200 cm in vier gelijke stukken.


Werkbeschrijving

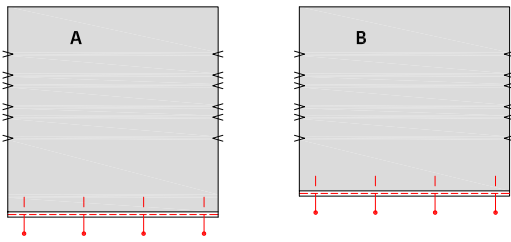


1 Stik de onderkant van het buitenpand (A) 0,5 cm om, alsook de onderkant van het binnenpand (B).

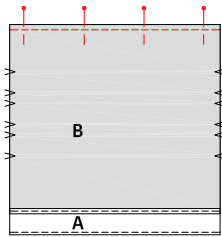


2 Stik de bovenkanten van A en B met de goede kanten op elkaar op 0,5 cm. Dit is de bovenkant van het masker die je op de neus vouwt.

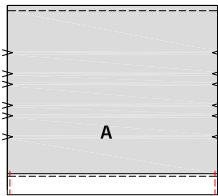


3 Vouw de onderkant van A nogmaals 2 cm om. Stik niet dicht, maar geef een paar steekjes aan de zijkanten zodat het omgevouwen blijft. En strijk de vouw er eventueel in. Deze vouw dient om de filter op zijn plaats te laten zitten.

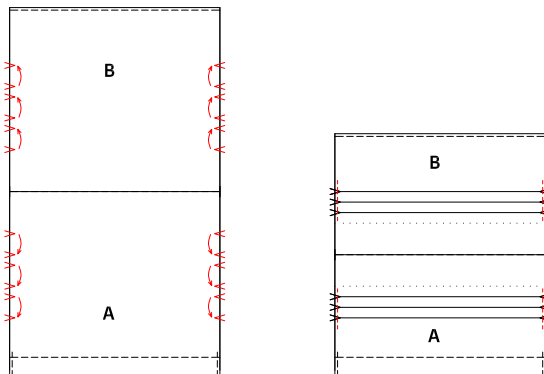


4 Speld de knipjes aan de zijkanten van A en B op elkaar, zoals aangegeven op het patroon. Kijk goed in welke richting de pijltjes staan. Stik de plooitjes vast in de naad (op 0,3 cm van de rand).

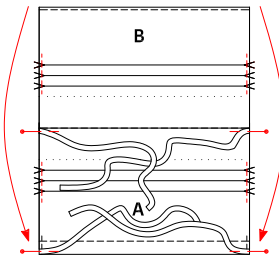

5 Speld van elk lint een uiteinde vast in een hoek van A. Leg het uiteinde van het lint tegen de rand van de stof, de rest van het lint ligt naar binnen.

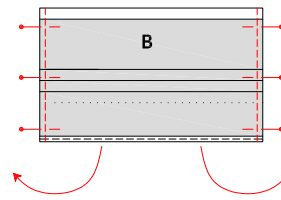

6 Vouw nu A en B met de goede kanten op elkaar. De linten liggen nu tussen de twee stoflagen. Stik de zijkanten van het mondmasker dicht. Vouw het mondmasker daarna binnenstebuiten.

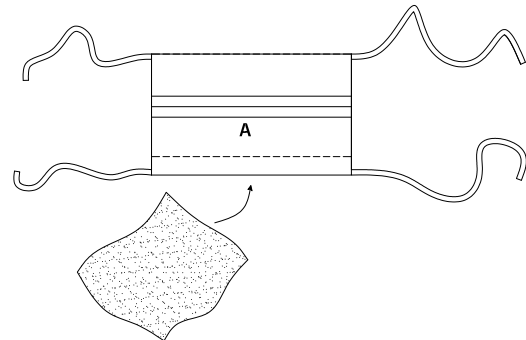

7 Stop het filtermateriaal in het mondmasker via de opening onderaan. De omslag in A zorgt ervoor dat het filtermateriaal er niet uit kan vallen.

8 Leg de bovenkant van het mondmasker op je neus en knoop de bovenste lintjes vast achter je hoofd (de lintjes passeren boven je oren). Knoop de onderste lintjes vast achter je nek. Zorg ervoor dat het masker boven- en onderaan goed aansluit aan je gelaat. Klaar!

A

volwassenen / adults / adultes / Erwachsene



buitenpand / outside / extérieur / Außenseite

incl. naadwaarde

incl. seam allowance

avec surplus de couture



inkl. Nahtzugabe

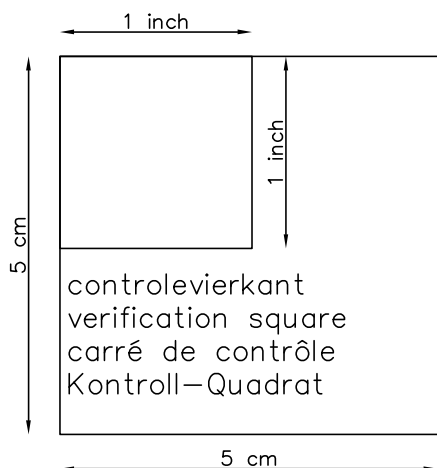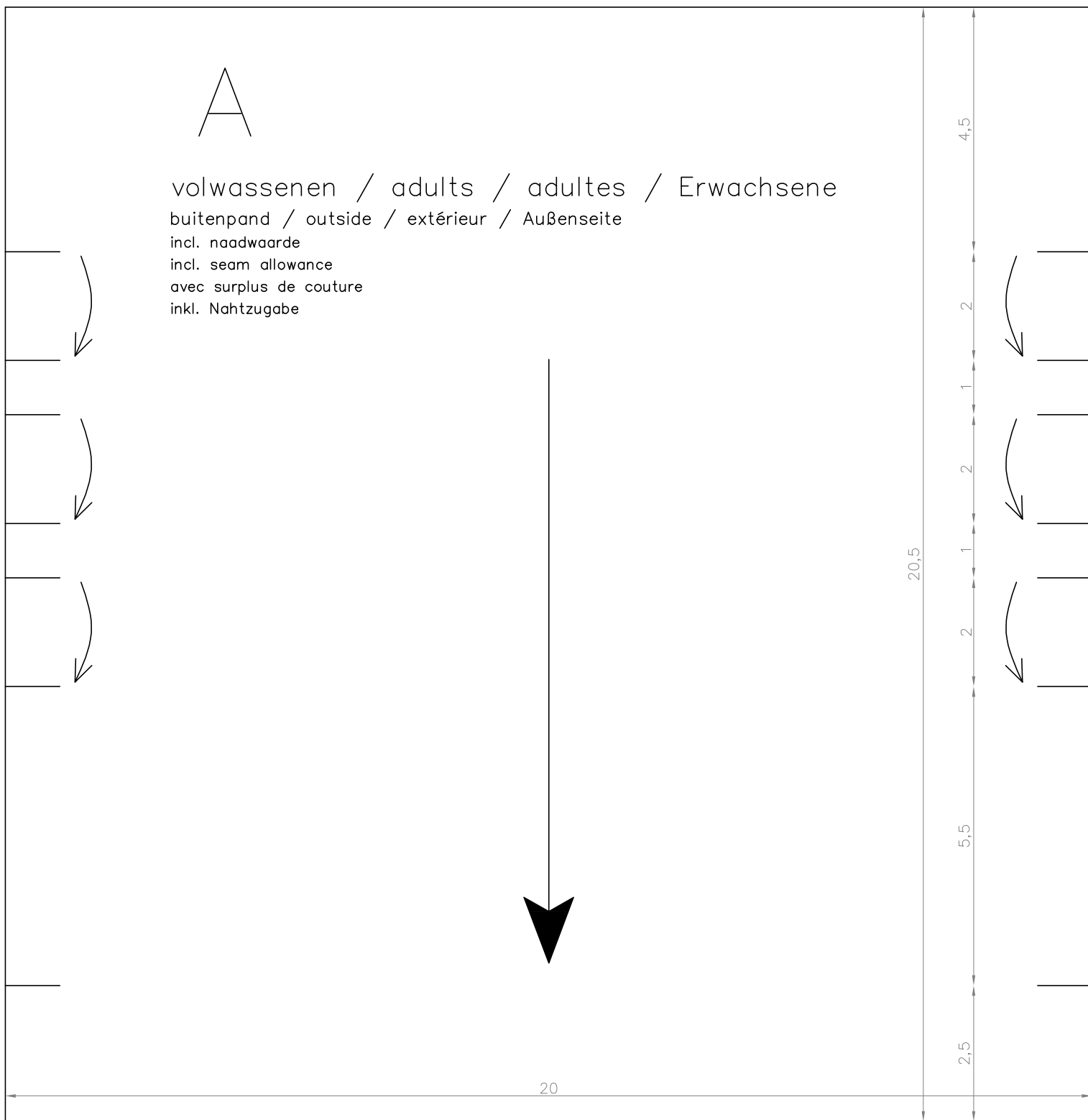

B

volwassenen / adults / adultes / Erwachsene

binnenpand / inside / intérieur / Innenseite
incl. naadwaarde
incl. seam allowance
avec surplus de couture
inkl. Nahtzugabe

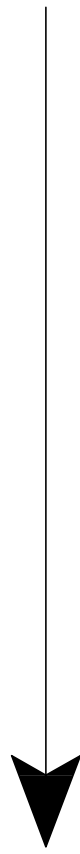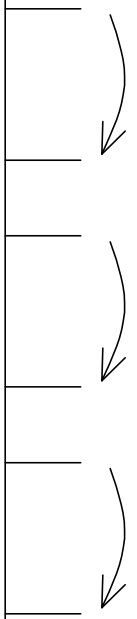

4,5

18,5

2

1

2

1



2

6

20



14

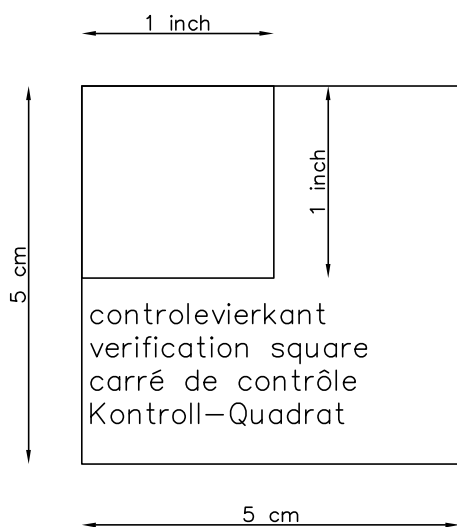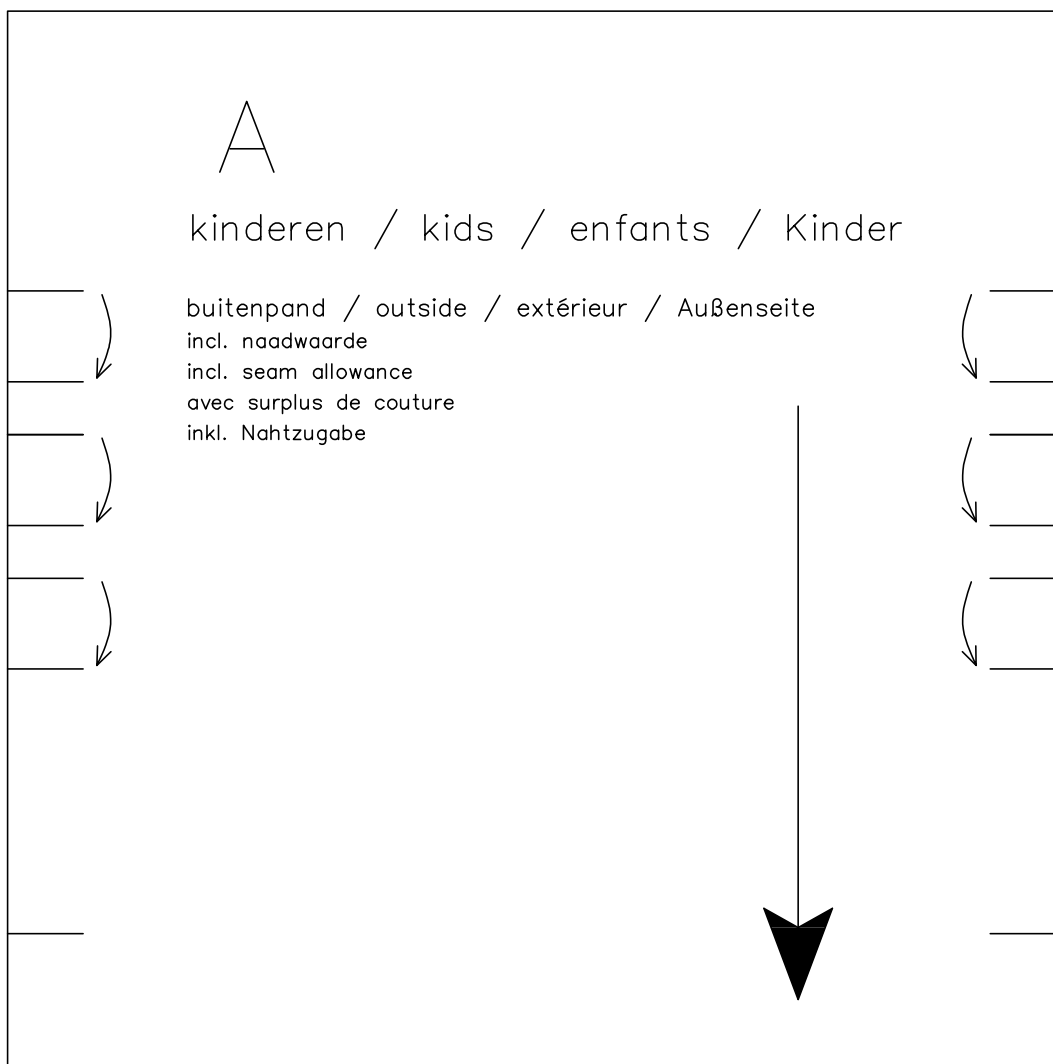

14

