

2019

7 jaar garantie!!

 **TOPRO**

ROLLATORS



Topro Benelux

Importeur: Preston Ability

Tel NL 0031 (0)36 53 53 580

Tel BE 0032 (0)14 75 73 40

2019

 TOPRO

Topro rollators, uw vrijheid, uw mobiliteit, uw gemak!

- Geproduceerd in Noorwegen door TOPRO AS
 - Ontworpen om de kwaliteit van uw leven te vergroten en te verbeteren
 - Ontwikkeld in samenwerking met therapeuten
 - Gefabriceerd met geavanceerde technologie
 - Modern lichtgewicht design
 - Kwaliteitsgarantie volgens NS-EN ISO 9001
 - 7 jaar garantie*

Topro Benelux

Tel NL 0031 (0)36 53 53 580

Tel BE 0032 (0)14 75 73 40

info@prestonability.com

www.toprobenelux.com

* Met uitzondering van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en bij onjuist gebruik van de rollator.

TOPRO
ODYSSEÉ

De reis rollator!

Het veilige, innovatieve vouw systeem maken
de Topro Odysseé perfect voor transport en reizen!





Ontgrendeld

Vergrendeld

Een indicator aan de voorkant van de rollator geeft aan of de rollator op de juiste manier is uitgekapt en dus veilig te gebruiken is.



Staat stevig rechtop in opgevouwen positie. Neemt zeer weinig ruimte in beslag bij opslag.

De rollator is gemakkelijk naar beneden te vouwen met het mechanisme op de duwstang die op een gebruiksvriendelijke hoogte is geplaatst.



Zeer makkelijk te transporteren in de speciaal ontworpen transporttas.

De Topro Odysse, reizen met een rollator is nog nooit zo makkelijk geweest!

De nieuwste rollator van Topro, de Odysse, is de perfecte reis rollator. Deze rollator kan volledig worden ingeklapt en wordt geleverd met gratis transporttas.

De Odysse is uitgerust met een uniek gepatenteerd twee-weg vouw systeem dat u bij geen enkele andere reis rollator zult vinden. Dit eenvoudig te bedienen mechanisme zit vlak onder het handvat, door deze simpelweg naar beneden te duwen zal de rollator naar beneden klappen. Deze rollator heeft een eenvoudige ontgrendeling onder het zitje en het opvouw mechanisme is zeer veilig. De rollator kan pas worden ingeklapt zodra de rollator volledig horizontaal samengevouwen is.

Deze rollator wordt geleverd met een grote boodschappentas welke een draag capaciteit heeft van 10 kg. Volledig opgevouwen heeft de Odysse een afmeting van 75 x 44,5 x 24,5 cm.



815001 - Racing Green



815000 - Marine Blue



De ondersteunende reisgenoot!

- Uniek in twee richtingen te vouwen (octrooi op aangevraagd)
- Veilig vouwmechanisme, kan niet omlaag worden opgevouwen voordat deze volledig zijwaarts is gevouwen
- Zeer compact wanneer deze is opgevouwen 75 x 44,5 x 24,5 cm
- Inclusief praktische draagtas
- Ruime uitbreidbare boodschappentas 13 - 22,5 liter, maximaal draagvermogen 10 kg
- De band voor het samenbinden van de rollator als deze is opgevouwen kan ook gebruikt worden als tilband voor de boodschappentas.


Funcities

- Er zijn verschillende wielen verkrijgbaar die gemakkelijk verwisseld kunnen worden dankzij het Quick Release systeem.
- Kantelfunctie door middel van stepsteun
- Voorzien van bel
- Veilig, stabiel en lichtgewicht
- Getest en goedgekeurd volgens EN ISO 11199-2 en EN ISO 10993-5

Maat

M (Medium)

Maximaal gebruikersgewicht	150 kg
Gewicht totaal	8,2 kg
Draagvermogen boodschappentas	10 kg
Gebruikerslengte	150 - 200 m
Hoogte van de handvatten	81,5 - 1,00 m
Maximale lengte	65 cm
Maximale breedte	60 cm
Afstand tussen de handvatten	47 cm
Zithoogte	62 cm
Draaicirkel	84 cm
Diameter wielen	20 cm
Breedte wielen	3,6 cm
Afstand naar remhendel	6,5 cm
Hoogte volledig opgevouwen, horizontaal en naar beneden	44,5 cm
Hoogte opgevouwen enkel horizontaal	81,5 cm
Breedte ingeklapt	24,5 cm
Lengte volledig opgevouwen, horizontaal en naar beneden	75 cm
Transport gewicht, exclusief wielen en boodschappentas	6,0 kg
Totaal gewicht inclusief wielen en boodschappentas	8,2 kg
Kleur	Blauw

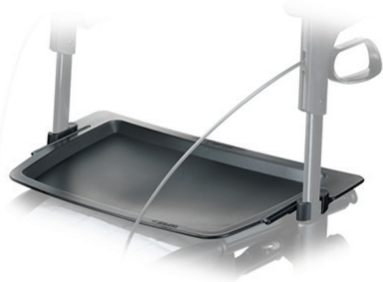

Dienblad
814728



Bloemen design
814141



Eenzijdige beremming
814026



Anti-slip matje voor dienblad
814059



Bidon houder
814043



Stokhouder
814457



Rugsteun
815270 kort | 815272 lang



Wielen met spike (achter)
814670



Off Road wielen - set
814649



Polstering voor rugsteun
815274



Handvat voor begeleider
814014



Paraplu
814068



Tas met rits
814046



Slot
814023



Naamplaatje
814024



LED lampje met klip
815260



TOPRO
TROJA 2G

 TOPRO



DE NIEUWE GENERATIE ROLLATORS!
Veiligheid, flexibiliteit met optimaal comfort.

www.toprobenelux.com

Het model op deze pagina is de Troja 2G rollator.

TOPRO TROJA 2G



1. Ergonomische handvatten, biedt de mogelijkheid de handvatten op meerdere manieren vast te houden.
2. De wielen zijn voorzien van een Quick Release systeem, het verwijderen of verwisselen van wielen in slechts enkele seconden.
3. Soft wielen, de 2G rollator is standaard uitgevoerd met deze wielen. Ideaal voor gebruik buiten op oneffen terrein.
4. Grip wielen, optioneel verkrijgbaar voor de Troja 2G rollator. Ideaal voor gebruik binnen op vlakke ondergrond.
5. De Troja 2G rollator heeft standaard een bel.
6. De boodschappentas is afneembaar en heeft een draagvermogen van 10kg.
7. De rollator is rondom voorzien van reflectoren zodat alle kanten van de rollator goed zichtbaar zijn in het donker.

Verkrijgbaar in de kleuren grijs (M), zilver (S), wijnrood, wit, roze, blauw en zwart (M).
Alle rollators worden geleverd met bijpassende boodschappentas.

TOPRO TROJA 2G

De innovatieve Troja 2G loopt voor op de concurrentie met veiligheid, flexibiliteit en optimaal comfort!

De Topro Troja 2G is ontworpen op basis van onderzoek en feedback van gebruikers en therapeuten. De Troja 2G heeft zeer gebruiksvriendelijke functies en een zeer hoge focus op veiligheid en comfort.



Limited Edition kleuren 2019

Roze Rose, White Barrok, Wijnrood Tartan, Luxury Grey, Capri Blue, Black Matte inclusief bijpassende boodschappentas en rugsteun.



Maat

M (Medium)


S (Small)

X (Extra Small)

	M (Medium)	S (Small)	X (Extra Small)
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg	125 kg	80 kg
Gewicht van de rollator met boodschappentas en wielen	7,7 kg	7,3 kg	7,1 kg
Maximaal draaggewicht boodschappentas	10 kg	10 kg	5 kg
Gebruikerslengte	150 - 200 cm	135 - 170 cm	125 - 160 cm
Hoogte van de handvatten	78 - 100 cm	67 - 86 cm	64 - 79 cm
Maximale lengte rollator	65 cm	65 cm	65 cm
Maximale breedte rollator	60 cm	60 cm	52 cm
Afstand tussen de handvatten	47 cm	47 cm	37 cm
Zithoogte	62 cm	54 cm	50 cm
Draaicirkel	84 cm	84 cm	79 cm
Diameter voor en achterwielen	20 cm	20 cm	20 cm
Breedte voor en achterwielen	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Afstand remkabel	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm
Lengte opgevouwen	65 cm	65 cm	65 cm
Breedte opgevouwen	24 cm	24 cm	24 cm
Hoogte opgevouwen	81,5 cm	74 cm	65 cm

De getoonde kleuren in deze brochure kunnen afwijken van het origineel. Genoemde afmetingen bij benadering.

TOPRO TROJA 2G

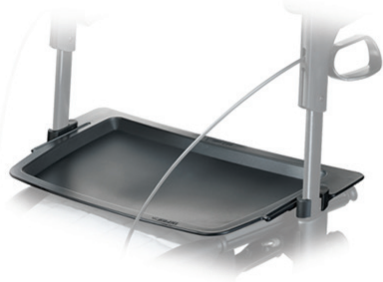

Dienblad
814728



Bloemen design
814141



Eenzijdige beremming
814026



Anti-slip matje voor dienblad
814059



Bidon houder
814043



Afneembaar boodschappennetje



Rugsteun
815270 kort | 815272 lang



Polstering voor rugsteun
815274



Off Road wielen - set
814649



Grip wielen, set van 4
814617



Handvat voor begeleider
814014



Stokhouder
814025



Boodschappentas Rose
814672



Boodschappentas Classic Tartan
814043



Boodschappentas Baroque
814041



Tas met rits
814046




Boodschappentas Capri Waves
814677



Transporttas
814042



Paraplu
814068

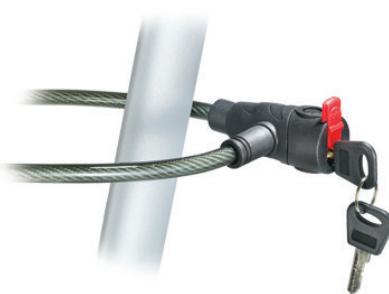

Anti-diefstal slot
814023



Zuurstoffleshouder
814009

TOPRO TROJA 2G



Winter accessoires

Handschoenen, zitje en frame design, in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.



Naamplaatje

814024



LED lampje met klip

815260



TOPRO
TROJA Classic

TOPRO

DE ORIGINELE!

Troja Classic rollator, sinds 2002!

Wie kent hem niet, de populaire Troja rollator. Een elegante en praktische lichtgewicht rollator en al sinds 2002 op de markt. Makkelijk te bedienen, eenvoudig horizontaal opvouwbaar en net als alle andere Topro modellen 7 jaar garantie!



www.toprobenelux.com

TOPRO TROJA Classic



TOPRO Troja rollators
Makkelijk horizontaal opvouwbaar, neemt weinig ruimte in beslag.

- Trek aan het koord bovenop de zitting en de rollator vouwt horizontaal samen.
- Duw de zitting naar beneden en de rollator klapt eenvoudig weer uit.
- Uniek memory systeem voor de hoogte instelling van de handvatten.
- Staat stevig op zijn wielen, ook als deze is opgevouwen.
- Neemt weinig ruimte in beslag en is makkelijk te transporteren.
- Ideaal voor gebruikers die veel reizen met de auto, trein, bus of vliegtuig.

Ook verkrijgbaar in
de kleur wijnrood

Een elegante en praktische lichtgewicht rollator.

- Gecoat aluminium frame met kunststof koppelingen.
- Lagers van hoge kwaliteit in wielen en voorvorken voor uitstekend rij comfort
- Kan worden afgespoten en gereinigd.
- Alle slijtbare onderdelen kunnen worden vervangen.
- Getest en goedgekeurd volgens EN ISO 11199.

Uitstekende rem functie en voorzien van drempelhulp.

- Makkelijk te rijden over obstakels zoals stoepranden dankzij drempelhulp.
- Veilig en comfortabel in gebruik.



TOPRO TROJA Classic

Maat	M (Medium)	S (Small)	X (Extra Small)
Artikelnummer	814750	814770	814745
Kleur	Donker grijs	Zilver	Zilver
Maximaal gebruikersgewicht	165 Kg	125 Kg	80 Kg
Gewicht van de rollator met boodschappentas en wielen	7,25 Kg	7,1 Kg	6,6 Kg
Maximaal draaggewicht boodschappentas	10 Kg	10 Kg	5 Kg
Gebruikerslengte	150 - 200 cm	135 - 170 cm	125 - 160 cm
Hoogte van de handvatten	78 - 100 cm	67 - 86 cm	63,5 - 79 cm
Maximale lengte rollator	65 cm	65 cm	65 cm
Maximale breedte rollator	60 cm	60 cm	52 cm
Afstand tussen de handvatten	47 cm	47 cm	37 cm
Zithoogte	62 cm	54 cm	50 cm
Draaicirkel	84 cm	84 cm	79 cm
Diameter voor en achterwielen	20 cm	20 cm	20 cm
Breedte voor en achterwielen	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Afstand remkabel	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm
Lengte opgevouwen	65 cm	65 cm	65 cm
Breedte opgevouwen	24 cm	24 cm	24 cm
Hoogte opgevouwen	80 cm	74 cm	65 cm
Handvatten	Anatomisch	Anatomisch	Anatomisch

Geschikt voor gebruik binnen en buiten

TOPRO Troja Walker


De Troja Classic rollator is ook verkrijgbaar met onderarmschalen, de Topro Troja Walker. De onderarmschalen zijn niet geschikt voor de modellen Olympos en Troja 2G. Uitgebreide informatie over de onderarmschalen vindt u in de brochure van de Topro Troja Walker.

De Walker is compleet te bestellen of achteraf als accessoire, zo kunt u van elke Troja rollator een Walker maken mocht dit ooit nodig zijn.

De Walker beschikt over hetzelfde comfort als de Troja rollator, echter is de Walker alleen geschikt voor **gebruik binnen op vlakke ondergrond**.



TOPRO TROJA Classic

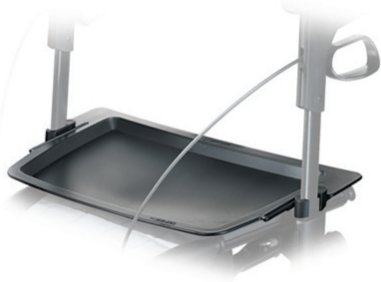

Dienblad (niet geschikt voor maat X)
814728



Anti-slip matje voor dienblad
814059



Bloemen design
814141



Paraplu
814068



Bidon houder
814043



Eenzijdige beremming
814026



Rugsteun
815271 kort | 815273 lang



Polstering voor rugsteun
815274



Stokhouder
814025



Winter accessoires
Handschoenen, zitje en frame design, in
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.



Handvat voor begeleider
814014



LED lampje met klip
815260

TOPRO
TROJA Classic



Anti-diefstal slot
814023



Zuurstoffleshouder
814009



Naamplaatje
814024



Onderarmschalen
814829 Maat M
814845 Maat S



Stabilisatie-stang
814729



Sleeppremmen per paar
814032



Tas met rits
814046



Transporttas
814042



Boodschappennetje
814625

TOPRO TROJA Classic



Boodschappentas Grey
814622



Boodschappentas Barroque
814041



Boodschappentas Rose
814672



Boodschappentas Capri Blue
814677



Boodschappentas Tartan
814043

TOPRO Troja X (Extra Small)

De Topro Troja Classic rollator is ook verkrijgbaar in de maat Extra Small. De kleine, smalle rollator is speciaal ontworpen voor kinderen of kleine mensen. Speciaal voor de kinderen optioneel ook verkrijgbaar in een leuke spetterende kleur of voorzien van leuke stickers op het frame.

Bijvoorbeeld met een vrolijke giraffe print!! Vraag bij ons naar de mogelijkheden!!



TOPRO
OLYMPUS

DE IDEALE BUITEN ROLLATOR!

Een stevige en praktische rollator voor een actief leven.



www.toprobenelux.com

De Olympus op deze afbeelding is uitgevoerd met offroad banden (optioneel).

TOPRO OLYMPOS

TOPRO Olympos

De perfecte rollator voor buiten! Met grote voorwielen en Soft banden waarmee u zeer comfortabel kunt lopen over oneffenheden in de weg. De afneembare en afsluitbare boodschappentas kan maar liefst 15kg aan boodschappen en bagage dragen. **De Olympos rollator wordt standaard geleverd inclusief rugsteun!**



Olympos Special Urban Edition Black Matte



Speciaal ontworpen voor gebruik buiten, maar de Olympos is ook zeker geschikt om binnen te gebruiken.

- De Soft banden zijn gemaakt op comfortabel te kunnen lopen over oneffen terrein zoals klinkers, zand wegen en bospaden.
- Voorzien van een ruime afneembare en afsluitbare boodschappentas die maar liefst 15kg kan dragen.
- Gemaakt met duurzame materialen en geschikt voor elk weertype.
- Getest en goedgekeurd volgens EN ISO 11199.

Makkelijk opvouwbaar met memory functie voor de hoogte instelling van de handvatten.

- Uniek memory systeem voor de hoogte instelling van de handvatten.


Uitstekende rem functie

- Veilig in gebruik en praktisch dankzij drempelhelp.
- Makkelijk bedienbare remmen.
- Optioneel is het ook mogelijk de remmen alleen rechts of links te bedienen.



Maat	M (Medium)	S (Small)
Artikelnummer	814302	814307
Kleur	Donker grijs	Zilver
Maximaal gebruikersgewicht	150 Kg	150 Kg
Gewicht van de rollator	9,1 Kg	8,0 Kg
Maximaal draaggewicht boodschappentas	15 Kg	15 Kg
Gebruikerslengte	150 - 195 cm	140 - 170 cm
Hoogte van de handvatten	76 - 95 cm	71 - 87 cm
Maximale lengte rollator	76 cm	76 cm
Maximale breedte rollator	70,5 cm	70,5 cm
Afstand tussen de handvatten	50 cm	50 cm
Zithoogte	60 cm	54 cm
Draaicirkel	94 cm	94 cm
Diameter voorwielen	27,5 cm	27,5 cm
Diameter achterwielen	22,5 cm	22,5 cm
Breedte voor en achterwielen	4,2 cm	4,2 cm
Grijpafstand remhendel	6,5 cm	6,5 cm
Hoogte opgevouwen	86 cm	83 cm
Breedte opgevouwen	29 cm	29 cm
Lengte opgevouwen	76 cm	76 cm

Geschikt voor gebruik binnen en buiten

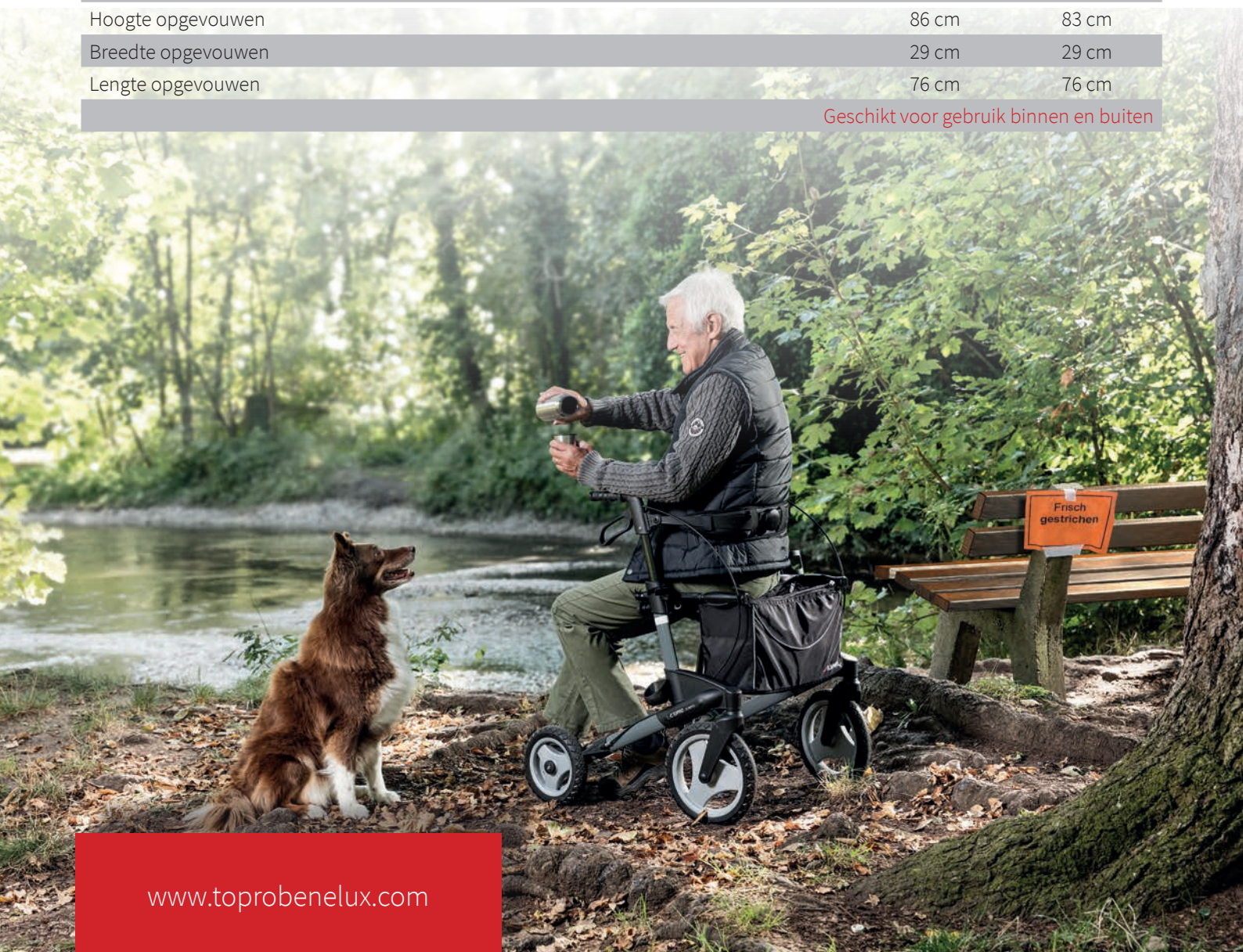



Transport tas
814042



Bloemen design
814141



Eenzijdige beremming
814026



Paraplu
814068



Bidon houder
814043




Zuurstoffles houder
814009



Rugsteun
815271 kort | 815273 lang



Postering voor rugsteun
815274

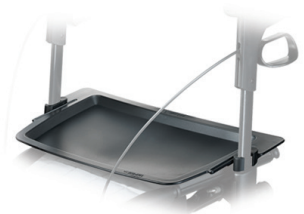

Dienblad voor Olympos Medium
814212 * niet geschikt voor Small



Tas met rits
814046



Handvat voor begeleider
814014



Anti slip matje voor dienblad
814059

TOPRO OLYMPOS



Slot
814023

Naamplaatje
814024

Stokhouder
814040



TOPRO
TROJA NEURO



DE PARKINSON ROLLATOR

Extra veilig met optimale controle

De TOPRO Troja - nu verkrijgbaar met een omgekeerd remsysteem (binnenkort optioneel ook met laser verkrijgbaar). Ontworpen en ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Parkinson en andere neurologische aandoeningen.

TOPRO TROJA NEURO



Extra veilig

- Het omgekeerde remsysteem zorgt ervoor dat de remmen automatisch worden geactiveerd.
- De rollator beweegt alleen wanneer de remhandgrepen worden ingedrukt.
- Als de remhandgrepen worden losgelaten zal de TOPRO Troja Neuro onmiddellijk stoppen.
- Het omgekeerde remsysteem voorkomt vallen.
- Het is veilig om te gaan zitten en te gaan staan doordat de remmen automatisch worden ingeschakeld.
- Het is mogelijk de remmen volledig uit te schakelen door de remhandgrepen helemaal naar beneden te duwen. De rollator zal dan vrij kunnen bewegen.
- De kleine draaicirkel maakt het makkelijk de rollator in kleine ruimtes te gebruiken.
- De TOPRO Troja Neuro is optioneel verkrijgbaar met laser, deze heeft een groen laserlicht dat helpt bij het “bevriezen” die kunnen optreden bij de ziekte van Parkinson.
- Voorzien van drempelhulp om makkelijk over drempels en stoepanden te gaan.
- Zeer veel accessoires verkrijgbaar.

Makkelijk opvouwbaar, neemt weinig ruimte in beslag

- Trek aan het koord bovenop de zitting en de rollator vouwt horizontaal samen
- Duw de zitting naar beneden en de rollator klapt eenvoudig weer uit en vergrendeld als u een klik hoort
- Uniek memory systeem voor de hoogte instelling van de handvatten
- Staat stevig op zijn wielen, ook wanneer deze is opgevouwen
- Neemt weinig ruimte in beslag en is makkelijk te transporteren
- Ideaal voor gebruikers die veel reizen met de auto, trein, bus of vliegtuig

Praktisch en lichtgewicht

- Plastic coated aluminium frame met kunststof koppelingen
- De stof bevat plastic en polyester
- In totaal zitten er 12 kogellagers in het wiel en de vorken voor uitstekend rijcomfort
- Kan gestoomd, gespoeld en gewassen worden, op voorwaarde dat de laserlicht en de schakelkast zijn verwijderd

TOPRO TROJA NEURO



Laserlicht met draadloze schakelaar
Het TOPRO Troja Neuro laser model wordt geleverd met laserlicht dat een persoon kan helpen die last heeft van “bevrozingen” bij de ziekte van Parkinson. Het laserlicht kan gemakkelijk vanuit de handgreep worden bediend en werkt draadloos.

Maat	M (Medium)	S (Small)
Maximaal gebruikersgewicht	165 kg	125 kg
Gewicht standaard model	7,8 kg	7,4 kg
Maximaal draaggewicht boodschappentas	10 kg	10 kg
Gebruikerslengte	150 - 200 cm	135 - 170 cm
Hoogte van de handvatten	78 - 100 cm	67 - 86 cm
Maximale lengte rollator	65 cm	65 cm
Maximale breedte rollator	60 cm	60 cm
Afstand tussen de handvatten	47 cm	47 cm
Zithoogte	62 cm	54 cm
Draaicirkel	84 cm	84 cm
Diameter voor en achterwielen	20 cm	20 cm
Breedte voor en achterwielen	3,6 cm	3,6 cm
Afstand remkabel	6,5 cm	6,5 cm
Lengte opgevouwen	65 cm	65 cm
Breedte opgevouwen	24 cm	24 cm
Hoogte opgevouwen	80 cm	74 cm



De laser ontvangt draadloze signalen van de schakelaar op de handgreep en produceert een groen laserlicht dat als een lijn tussen de achterwielen loopt. Bij geen beweging zal het licht na 15 seconden worden uitgeschakeld, dit kan naar wens aangepast worden. Een groen laserlicht is 6 keer beter zichtbaar dan een rood laserlicht.

TOPRO TROJA NEURO



Dienblad
814728



Bloemen design
814141



Eenzijdige beremming
814026



Anti-slip matje voor dienblad
814059



Bidon houder
814043



Naamplaatje
814024



Rugsteun
815270 kort | 815272 lang



Polstering voor rugsteun
815274



Zuurstoffleshouder
814009



Transporttas
814042



Handvat voor begeleider
814014



Stokhouder
814025

TOPRO
TROJA NEURO



Tas met rits
814046



Paraplu
814068



Boodschappentas grijs
814622



Boodschappentas roze
814672



Boodschappentas Barok
814641



Boodschappentas Tartan
814643



Boodschappentas Blue Waves
814677

TOPRO Rollators

De Topro rollator wordt sinds 2002 geproduceerd in Noorwegen, in nauwe samenwerking met ergotherapeuten, fysiotherapeuten en ontwerpers. Het productieproces vindt plaats in de moderne fabriek in Gjøvik. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste geavanceerde technologie om de hoogste normen van kwaliteit te garanderen. Topro AS geeft dan ook 7 jaar garantie op al haar rollators, en dat is uniek voor een rollator!

De importeur en distributeur van Topro in de Benelux is Preston Ability. Preston Ability importeert en exporteert hulp-en revalidatiemiddelen van hoge kwaliteit. Er is een wereldwijd distributie netwerk met meer dan 700 dealers alleen al in Nederland en België.

Op zoek naar een Topro dealer bij u in de buurt?
Neem contact met ons op:

Preston Ability

Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde

info@prestonability.com
www.prestonability.com

Tel NL: 0031 (0)36 53 53 580
Tel BE: 0032 (0)14 75 73 40

