

Kinderstoelen

Voor activiteiten en comfort op school en thuis



VELA's assortiment van kinderstoelen combineert comfort met functionaliteit en ondersteuning ter bevordering van de autonomie en sociale inclusie



Voor activiteiten en comfort op school en thuis

VELA's kinderstoelen ondersteunen personen met een handicap en helpen hun een optimaal niveau van autonomie te bereiken, zowel thuis als op school. Alle stoelen beschikken over vier soepel lopende wieljes en een unieke centrale rem die de gebruiker in staat stelt veilig plaats te nemen in de stoel.



VELA Hip Hop 50



VELA Hip Hop 100
met E1-zit-/rugsteun & gordel

ACTIVITEIT- EN SCHOOLSTOELN

- :: De rem en armsteunen voorzien extra veiligheid en een verhoogde concentratie tijdens werk en andere activiteiten
- :: De rem en armsteunen stabiliseren de stoel en zorgen ervoor dat uw kind gemakkelijk in de stoel kan plaatsnemen
- :: Gemakkelijk beweegbare wieljes zorgen ervoor dat de gebruiker dicht tot bij de taak kan komen
- :: Comfortabele en verstelbare zitting, rugsteun en kantelfunctie promoten een ergonomische zithouding
- :: De rugsteun voorziet een ergonomische lendensteun
- :: Verschillende zittingen en rugsteunen kunnen gecombineerd worden op basis van de leeftijd en behoeftes van het kind
- :: De zitting beschikt over een 'schuimreservoir' welke vervangen kan worden voor een optimale stabiliteit
- :: De bekleding is goed slijtvast en waterafstotend

VELA Hip Hop 50

- :: Praktische en simpele schelpstoel bedoeld voor klasruimtes, organisaties & instellingen
- :: Ook beschikbaar in een versie met de VELA Hip Hop 100-bekleding, E1-zitting en -rugsteun
- :: Extra korte zithoogte en - Breedte tot 25 centimeter
- :: Hoogteverstelling zowel links als rechts beschikbaar

VELA Tango 100S

- :: Goede ergonomie, comfort en ondersteuning voor een optimale zithouding, welke de deelname aan activiteiten promoot
- :: De rugsteun kan versteld worden in een hoek voor extra lendensteun

SCHOOLSTOELN (ELEKTRISCH)

- :: Traploze elektrische hoogteverstelling zorgt voor een comfortabele en veilige verstelling van de zithoogte
- :: Elektrische hoogteverstelling optimaliseert de zithoogte voor een verhoogde participatie. Deze functie biedt daarnaast ook ondersteuning tijdens de transfer van bv. bed naar stoel of het gaan van zit naar stand
- :: Armsteunen en rem stabiliseren de stoel
- :: Comfortabele en verstelbare zitting, rugsteun en kantelfunctie
- :: Speciale zittingen en rugsteunen kunnen het kind helpen te concentreren
- :: Stabiele basis en centrale veiligheidsrem, ondersteuning en verhoogde concentratie tijdens het werk en andere activiteiten

VELA Tango 100ES

- :: Goede ergonomie, comfort en ondersteuning voor een optimale zithouding, welke de deelname aan activiteiten promoot

VELA Tango 100ES met ES5-rugsteun

- :: Hoge rugsteun met laterale ondersteuning stabiliseert en ondersteunt het kind zonder behulp van lichaamsteunen

VELA Tango 100ES met lichaamsteunen

- :: Hoofd- en lichaamsteunen voor extra stabiliteit en veiligheid wanneer het kind in de stoel zit



VELA Tango 100S



VELA Tango 100ES



VELA Tango 100ES
met ES5 - rugsteun



VELA Tango 100ES
met hoofd-, laterale en zijsteun

Opmerking: de weergegeven stoelen beschikken mogelijks over accessoires die niet standaard worden meegeleverd



Accessoires

VELA's kinderstoelen zijn ontworpen zodat kinderen en jonge volwassenen met een handicap autonoom kunnen zijn en actief blijven. De juiste accessoires kunnen cruciaal blijken in het voorzien van o.a. een goede zithouding en de verhoogde participatie van het kind promoten.



Laterale ondersteuning



Dij-/ zijondersteuning



Abductieblok

LICHAAMSTEUNEN

- :: Laterale ondersteuning is geschikt voor kinderen die nood hebben aan stabiliteit aan de linker-, rechter- en voorzijde
- :: Dij-/zijsteunen beschikken over gewatteerde kussentjes die zorgen voor stabiliteit en comfort zonder de activiteit te beperken
- :: Abductieblokken zorgen ervoor dat de gebruikers een optimale, comfortabele positie behouden

VOET- & BEENSTEUNEN

- :: Voetensteun met uitvouwbare LP-plaat. Deze voetensteun wordt aan de stoel gemonteerd en gaat met de stoel mee wanneer deze in de hoogte versteld wordt
- :: Uitklapbare voetenstang, welke ingeklapt kan worden zodat deze niet in de weg zit of gebruikt kan worden als opstap wanneer het kind in de stoel plaatsneemt of er uit wil
- :: Voet- en enkelharnassen zijn geschikt voor kinderen die het moeilijk hebben om hun voeten op de voetenplaat te houden



Voetensteun met uitvouwbare LP-plaat



Uitklapbare voetenstang



Voet- en enkelharnassen



Y-zitgordel



H-zitgordel



Vierpuntsheupgordel voor het bekken

GORDELS

- :: De Y-zitgordel is een vierpuntsheupgordel met een verstelbare lengte. De zitgordel is beschikbaar met ofwel een drukslot of bindingvergrendeling
- :: De H-zitgordel zorgt voor lichaamscontrole en stabiliteit in de zithouding
- :: De vierpuntsheupgordel voor het bekken is geschikt voor kinderen en volwassenen die een erg ondersteunde heupgordel nodig hebben

OVERIGE

- :: De HH-hoofdsteun met kussen is verstelbaar opdat het kind een optimale ondersteuning voor het hoofd en de nek kan bekomen
- :: Stoffen hoezen tegen het morsen of waterresistente hoezen voor kinderen die lijden aan incontinentie. Een hoos is hygiënisch en kan eenvoudig verwijderd en gewassen worden.
- :: De voorzettafel plooit naar beneden en kan verwijderd worden. Het is in de hoogte, diepte en breedte verstelbaar opdat deze overeenkomt met de zitpositie van de gebruiker
- :: De meervoudig verstelbare duwstang houdt rekening met de houding van de zorgverlener wanneer deze de gebruiker in de stoel transporteert
- :: Een extensiegreep voor de remhendel vormt een voordeel voor heel wat kinderen aangezien velen van hen moeilijkheden ervaren om de standaard remhendel te bereiken
- :: De T-remhendel verlengt de standaard remhendel, wat het eenvoudiger maakt voor mensen met een handicap om naar de remhendel te reiken

BEKLEDING EN SCHUIM

- :: VELA biedt individuele op maat gemaakte oplossingen aan met betrekking tot de bekleding, het comfort en de ondersteuning van alle zittingen en rugsteunen, bv. pommel aan de voorkant van de zitting of laterale ondersteuning
- :: Indien een op maat gemaakt kussen vereist is, kan de O-zitting/- rugsteun gebruikt worden als basis om het aangepast kussen op te plaatsen
- :: VELA biedt ook oplossingen met geheugenschuim, Dunlopillo of andere



HH-hoofdsteun



Stoelhoezen




Voorzettafel



Meervoudig verstelbare duwstang



Remhendel extensiegreep

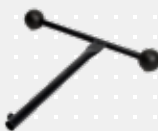

T-remhendel greep



E-zitting met pommel



ES-rugsteun met laterale ondersteuning



O-zitting/- rugsteun wanneer gebruik gemaakt wordt van speciaal kussen



Groei met de stoel

Met een VELA-kinderstoel is het mogelijk om met de stoel 'mee te groeien' en speciale aanpassingen te verkrijgen – voor een perfecte pasvorm voor kinderen en adolescenten.

VELA's kinderstoelen groeien werkelijk mee met de gebruiker. De unieke rugsteun kan versteld worden in de diepte naarmate het kind groeit. Mocht de gebruiker uiteindelijk uit de bestaande zitting zijn gegroeid, dan kan de zitting eenvoudig vervangen worden door een maatje groter – hetzelfde geldt voor onze rugsteunen. Ons modu-leer systeem stelt u in staat accessoires/ondersteuning toe te voegen in retrospectief wanneer dit nodig blijkt.

Het voorgevormd zitsysteem met geheugenschuim helpt om sacraal zitten te voorkomen. Een selectie van ondersteunende rugsteunen en verstelbare armsteunen helpt het kind gefocust te blijven en ondersteunt het in de klas of bij u thuis.

De ergonomische zitting- en rugsteunsystemen van VELA worden specifiek ontworpen voor kinderen en voorzien een optimaal zit-comfort, aangezien zowel de rugsteun als zitting aangepast kunnen worden om te voldoen aan de behoeftes van het individuele kind.

Advies over ergonomie

Een goede ergonomie is belangrijk voor kinderen met een handicap, aangezien heel wat activiteiten plaatsvinden tijdens het zitten. Het is ook belangrijk voor zorgverleners en therapeuten in relatie tot de werkomgeving, bv. op school of tijdens de training.

1. Een goede ergonomie betekent niet één specifieke zithouding, maar een variatie van verschillende zithoudingen voor verschillende taken tijdens de dag.
2. Gebruik de zit- en rugverstelling van de kinderstoel om de zithouding van het kind aan te passen – beweeg en pas de positie aan met betrekking tot de relevante activiteit.
3. Beweeg de stoel dicht tot bij de taak en vermijd houdingen waar het kind de rug of nek moet buigen of forceren.
4. Gebruik de hoogteverstelling en kantelfunctie om een goede zithoogte te bekomen. De hoogteverstelling dient ook om de zorgverlener te helpen tijdens het transport.

Een volwassene moet steeds het kind helpen bij het verstellen van de stoel zodat deze correct is ingesteld voor het kind overeenkomstig met de activiteit.

