

**LÖWENSTEIN**  
medical

**JULIA**




Meer ruimte voor dromen.

 With people in mind

# De kleine vrijheidsliefhebber

JULIA is een klein neusmasker dat bijzonder geschikt is voor zijslapers en bril dragers. Het past zich aan veel verschillende gezichtsvormen aan en heeft geen voorhoofdsteun nodig. Dat betekent dat je voor een ontspannen avondritueel je masker en je bril tegelijk kunt dragen.

Het slanke ontwerp en het perfect passende maskerkussen zorgen ervoor dat JULIA bijna gewichtloos aanvoelt, elke beweging volgt en in alle opzicht meer biedt. Meer vrijheid en meer ruimte voor dromen.

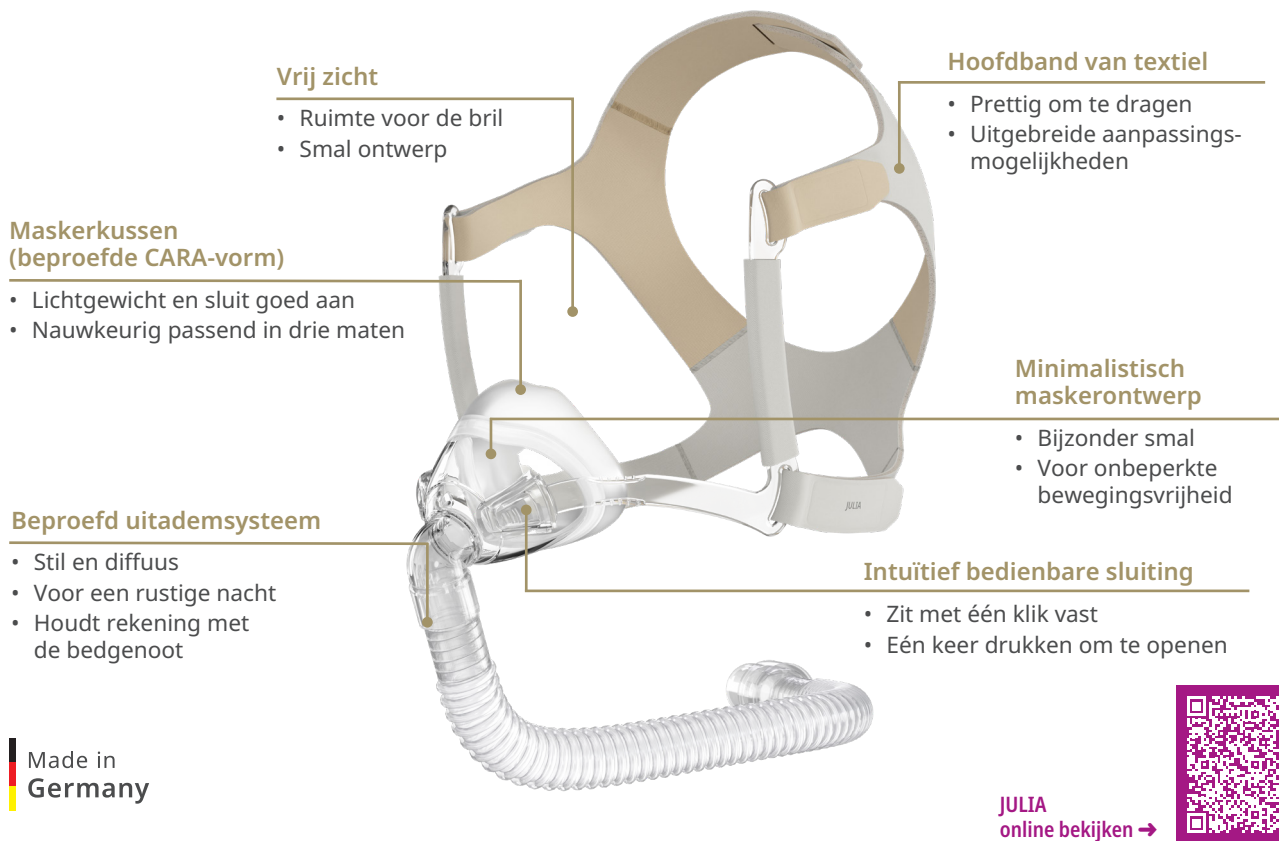

## Nauwkeurige pasvorm, smal ontwerp

Met JULIA voelt therapie heel natuurlijk. Het smalle ontwerp biedt vrijheid, zowel bij de avondroutine als tijdens het slapen. De uitstekende pasvorm is overgenomen van het beproefde CARA-model. Het maskerkussen vormt zich naar uw individuele gezichtscontouren en zorgt voor langdurig draagcomfort - ongeacht de vorm en grootte van uw gezicht.

## Vrij zicht voor bril dragers en zijslapers

Een nieuw kenmerk van JULIA is het vrije zicht, omdat dit ontwerp niet is voorzien van een voorhoofdsteun. 's Avonds lezen, tv kijken of op uw mobiele telefoon kijken kan voortaan dus ook met masker *en* bril. Door het ontbreken van de voorhoofdsteun liggen zijslapers bijzonder comfortabel. Er is in deze slaaphouding niets wat drukt of wegglijdt.

## Comfortabele hoofdband van textiel

De JULIA hoofdband zorgt ervoor dat het masker goed blijft zitten en comfortabel aanvoelt op de huid dankzij de zachte, huidvriendelijke materialen.

## Smalle maskerslang voor onbeperkte bewegingsvrijheid

Het minimalistische ontwerp van het masker omvat een bijpassende maskerslang. Deze is aanzienlijk dunner dan die voor gebruikelijke apparaten en zeer flexibel. In de nacht past hij zich aan de bewegingen van de slaper aan, zodat deze niet in zijn nachtrust wordt gestoord.

## Intuïtief bedienbare sluiting

De maskersluiting is eenvoudig te bedienen. De clip laat zich gemakkelijk in het maskerdeel schuiven en sluit met een hoorbare klik. 's Ochtends wordt de sluiting weer losgemaakt door met één vinger op het geribbelde oppervlak aan de zijkant te drukken.

# Een duurzaam model

## Geproduceerd met efficiënt gebruik van hulpbronnen

Door de productie van de hoofdband van dit masker te verbeteren, verbruiken we hiervoor aanzienlijk minder water, energie en chemicaliën. We zijn nu in staat om de vezelproductie en kleuring zo te combineren dat een extra verfbewerking overbodig is.

## Met hernieuwbare grondstoffen

De verpakking van JULIA bestaat voor 80% uit de hernieuwbare grondstof suikerriet.

## Gemakkelijk te recyclen

De maskeronderdelen van JULIA zijn zo ontworpen dat ze vrijwel per materiaaltype kunnen worden gerecycled. Tijdens de productie vermijden we dat er materialen worden gecombineerd, zodat het masker aan het einde van zijn levenscyclus gemakkelijk weer kan worden toegevoegd aan de materiaalkringloop.

Dat levert de volgende besparingen op<sup>1</sup>:



↓ -90%  
drinkwater



↓ -94%  
afvalwater



↓ -66%  
energieverbruik



↓ -70%  
chemicaliën



<sup>1</sup> Waarden door fabrikant vastgesteld

## Vervangende onderdelen



**Hoofdband JULIA  
incl. bandclips**  
standaard: LMT 26856  
groot: LMT 26949



**Hoesje 2 st.**  
LMT 17830



**Maskerkussen JULIA**  
Maat S: LMT 26636  
Maat M: LMT 26637  
Maat L: LMT 26638



**Maskerslang met aansluitingen**  
LMT 26713

Meer informatie over onze therapieoplossingen, toebehoren en maskersystemen vindt u op [loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

## Technische gegevens JULIA

Productklasse volgens verordening MDR (EU) 2017/745	II a	Therapiedruk	4 hPa – 30 hPa
Afmetingen (b x h x d)		Temperatuurbereik	
• Maat S	53 x 61 x 75 mm	• Bedrijf	+5 °C tot +40 °C
• Maat M	58 x 60 x 76 mm	• Transport en opslag	-20 °C tot +70 °C
• Maat L	62 x 64 x 77 mm		
Gewicht		Stromingsweerstand	
• Maat S	77 g	• bij 50 l/min	0,6 hPa
• Maat M	78 g	• bij 100 l/min	2,3 hPa
• Maat L	80 g		
Volume dode ruimte		Opgegeven tweecijferige geluidsemissiewaarde volgens ISO 4871:	
• Maat S	68 ml	• Geluidsdrukniveau	18 dB(A)
• Maat M	78 ml	• Geluidsvermogensniveau	26 dB(A)
• Maat L	92 ml	• Onzekerheidsfactor	3 dB(A)
Slangaansluiting conus volgens EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (mannelijk)	Levensduur	5 jaar
		Gebruiksduur	Maximaal 12 maanden <sup>1</sup>
		Toegepaste normen	EN ISO 17510: 2020

<sup>1</sup> De gebruiksduur is afhankelijk van de reiniging en de gebruikte reinigingsmiddelen, van de dagelijkse draagduur, de therapiedruk en de individuele zweetsecretie. Het gebruik van het tweede maskerkussen (optioneel verkrijgbaar) verlengt de gebruiksduur niet.

Benaming apparaat	Maat	Artikelnr.
JULIA	S	LMT 26710
JULIA	M	LMT 26720
JULIA	L	LMT 26730
JULIA incl. tweede maskerkussen	S	LMT 26710-1000*
JULIA incl. tweede maskerkussen	M	LMT 26720-1000*
JULIA incl. tweede maskerkussen	L	LMT 26730-1000*

\* Tweede maskerkussen in dezelfde maat wordt meegeleverd

CE 0197

Made in  
Germany



Gedrukt op  
100% gerecycled papier



  
Löwenstein Medical Technology  
Kronsaalsweg 40  
22525 Hamburg, Duitsland  
T: +49 40 54702-0  
F: +49 40 54702-461  
[info@loewensteinmedical.de](mailto:info@loewensteinmedical.de)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

**Distributie + service**  
Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Duitsland  
Tel. +49 2603 9600 0  
Fax +49 2603 9600 50  
[info@loewensteinmedical.com](mailto:info@loewensteinmedical.com)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

 With people in mind

