


## KOMPLETTE ATTACHMENTS


### PRECİ-HORIX STANDARD #1701

2 x 1704 Kunststoffprofil  
6 x 1802 gelber Reiter  
6 x 1703 Verarbeitungsreiter\*  
1 x 1705 Eindrückstift

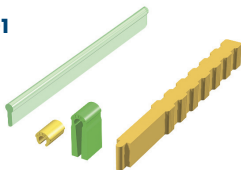


### PRECİ-HORIX PLASTICWAX #1731

2 x 1734 PLASTICWAX-Profil  
6 x 1802 gelber Reiter  
6 x 1703 Verarbeitungsreiter\*  
1 x 1705 Eindrückstift

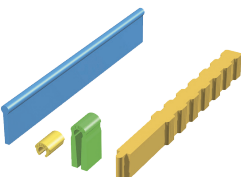

### PRECİ-HORIX COMBI #1741

1 x 1704 Kunststoffprofil  
2 x 1802 gelber Reiter  
2 x 1703 Verarbeitungsreiter\*  
2 x 1706 INOX-Gehäuse  
1 x 1705 Eindrückstift

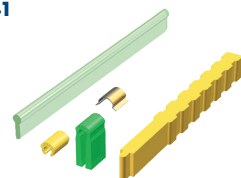

\* Nur zur Verwendung im Labor.

### PRECİ-HORIX-REITER

|                   |                                       |      |                      |
|-------------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| # 1802<br># 1802B | 6 ST.<br>50 ST.                       | gelb | normale Retention    |
| # 1805<br># 1805B | 6 ST.<br>50 ST.                       | weiß | reduzierte Retention |
| # 1806<br># 1806B | 6 ST.<br>50 ST.                       | rot  | starke Retention     |
| # 1807<br># 1807B | 2 G + 2 R + 2 W<br>25 G + 15 R + 10 W |      | Kombinationspackung  |



### PRECİ-HORIX-METALLGEHÄUSE

Ultradünnes INOX-Gehäuse mit goldgelber Titan-Nitrat-Schicht für den passgenauen Sitz der Reiter in der Prothese. Enthält Ni.

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| # 1706<br># 1706B | 6 ST.<br>50 ST. |
|-------------------|-----------------|



### PRECİ-HORIX-KUNSTSTOFFPROFIL

Profilstege aus restlos verbrennbarem Kunststoff. Nur zur Verwendung im Labor. Gießen Sie in einer harten Legierung.  
Länge: 50 mm - Höhe: 4 mm - ø 1,8 mm


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| # 1704<br># 1704B | 6 ST.<br>50 ST. |
|-------------------|-----------------|



### PRECİ-HORIX PLASTICWAX-PROFIL

Ideal zur Verwendung mit schnell aufheizbaren Einbettmassen. Nur zur Verwendung im Labor. Gießen Sie in einer harten Legierung. Länge: 50 mm - Höhe: 8,25 mm - ø 1,8 mm

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| # 1734<br># 1734B | 6 ST.<br>50 ST. |
|-------------------|-----------------|

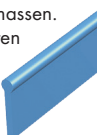

### AXIALE ATTACHMENTS

CEKA AXIAL  
PRECİ-CLIX AXIAL  
PRECİ-CLIX RADIKULÄR  
PRECİ-BALL

### EXTRAKORONALE ATTACHMENTS

CEKA EXTRAKORONAL  
PRECİ-VERTIX  
PRECİ-CLIX EXTRAKORONAL  
PRECİ-SAGIX  
PRECİ-S2

### PROFIL ATTACHMENTS

PRECİ-BAR  
**PRECİ-HORIX**  
PRECİ-CLIP

### DIGITALE BIBLIOTHEKEN

### SPEZIALITÄTEN

PRECİ-PROFILE  
PRECİ-POST  
CEKA SOL  
CEKA SITE  
CEKA BOND  
3C-BOND  
CEKA Multi - CEKA Multi O  
PERMA-RET  
PRECİ-SEP  
PLASTICWAX  
EXPANDO  
MESSINSTRUMENT

CEKA  
PRECİ-LINE

WWW.CKPL.EU

### NEBENWIRKUNGEN, WARN- UND VORSICHTSHINWEISE

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.

CE0197

Prospekt Nr. 273.DE-ed.E  
© Copyright ALPHADENT NV 02/2019  
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk




ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33,  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531  
E info@ckpl.eu



CEKA  
PRECİ-LINE

PROFIL  
ATTACHMENTS  
PRECİ-HORIX®

DEUTSCH

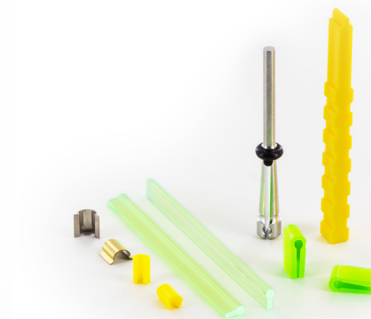


WWW.CKPL.EU

# PRECI-HORIX

## EINFACH UND VORTEILHAFT



Das PRECI-HORIX-Stegreitersystem, entwickelt von Helmut Hader, ist einfach zu verarbeiten und von dauerhafter Präzision. Es ist die wohl weltweit am häufigsten verwendete Stegverankerung. Zahntechniker schätzen PRECI-HORIX schon seit über 40 Jahren aufgrund der sicheren Retention der Kunststoffreiter, der unkomplizierten Nachsorge und des Tragekomforts für den Patienten.

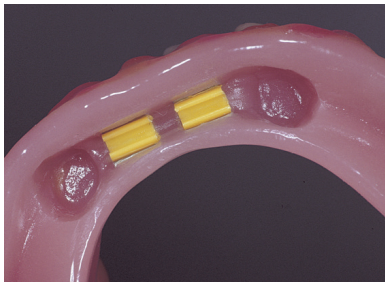

- ✓ Schnell und einfach ersetzbarer Reiter  
in drei verschiedenen Retentionswerten
- ✓ Freie Legierungswahl
- ✓ Hervorragend geeignet zur Verwendung auf Implantaten
- ✓ Direkte Abstützung mit Rotation
- ✓ Das hörbare Einrasten des Reiters signalisiert  
dem Patienten die sichere Verankerung



## EINFACHES ANBRINGEN DER REITER

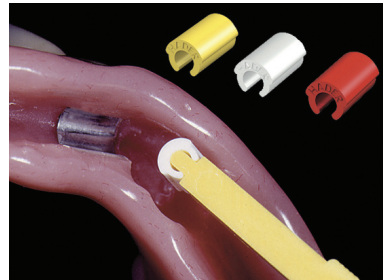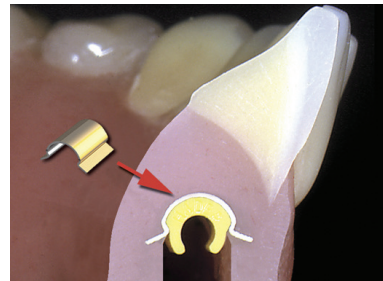

Empfohlene Verarbeitung: Polymerisieren Sie das Metallgehäuse für den passgenauen Sitz des Reiters in den Kunststoff ein. Setzen Sie dann den PRECI-HORIX-Kunststoffreiter in einem der drei Retentionswerte in das Metallgehäuse.

Weiß: reduzierte Retention  
Gelb: normale Retention  
Rot: starke Retention



Das Profil von 1,8 mm ist auch mit den PRECI-CLIP-Reitern kompatibel.

## EINFACHE VERARBEITUNG

